

## Instructions pour l'utilisation du stylo UnoReady de Cosentyx 300 mg

### Sécukinumab




**Veillez lire ENTièrement ces instructions avant de procéder à l'injection.**

Ces instructions ont pour but de vous aider à injecter correctement Cosentyx à l'aide du stylo UnoReady.

N'essayez surtout pas de faire l'injection à vous-même avant d'avoir été formé(e) à le faire par votre médecin, infirmier/ère ou pharmacien.

### Votre stylo UnoReady de Cosentyx 300 mg :

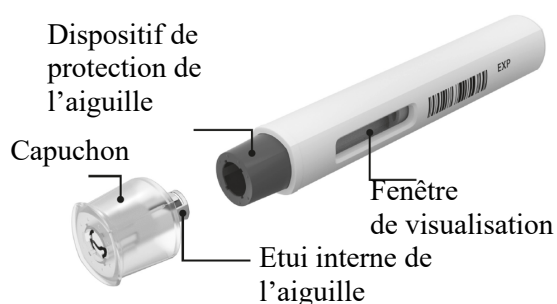

**N'utilisez pas** le stylo UnoReady de Cosentyx si le dispositif d'inviolabilité de l'emballage extérieur est endommagé.

Conserver le stylo UnoReady de Cosentyx dans son emballage extérieur non ouvert jusqu'à ce que vous soyez prêt(e) à l'utiliser, afin de le protéger de la lumière.

Conserver le stylo UnoReady de Cosentyx au **réfrigérateur** entre 2°C et 8°C et **hors de la portée des enfants**.

Le Stylo UnoReady de Cosentyx 300 mg est représenté ci-dessus avec le capuchon retiré. **Ne retirez pas** le capuchon avant d'être prêt(e) à faire l'injection.


- **Ne pas congeler** le stylo.
- **Ne pas agiter** le stylo.
- Ne pas utiliser le stylo si celui-ci est **tombé** avec le capuchon enlevé.

L'aiguille est recouverte par un dispositif de protection de l'aiguille et l'aiguille ne sera pas visible. N'appuyez ou ne poussez pas le dispositif de protection de l'aiguille car vous pourriez avoir une blessure par piqûre d'aiguille.

### Matériel nécessaire pour réaliser votre injection :


Inclus dans la boîte :

Stylo UnoReady de Cosentyx 300 mg neuf et inutilisé.

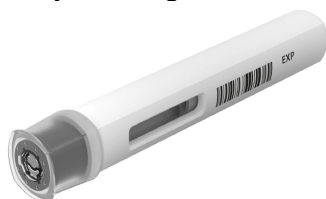


Non inclus dans la boîte :

- Compresse imbibée d'alcool.
- Coton ou compresse.
- Collecteur pour objets tranchants.

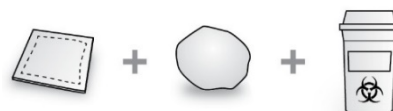

## Avant de procéder à l'injection :

Sortez le stylo UnoReady de Cosentyx 300 mg du réfrigérateur **30 à 45 minutes avant l'injection** afin de l'amener à température ambiante.

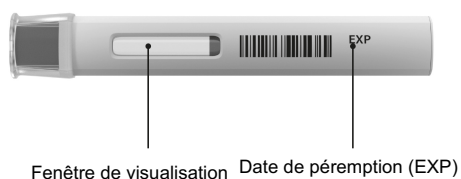

### 1. Vérifications de sécurité importantes à effectuer avant de procéder à l'injection :

Pour la « Fenêtre de visualisation » :

Le liquide doit être limpide. Sa couleur peut varier d'incolore à jaune pâle.



**Ne pas utiliser** si le liquide présente des particules clairement visibles, un aspect trouble ou une coloration nettement brune. Une petite bulle d'air peut être présente, ce qui est normal.

Pour la « Date de péremption » :

Vérifier la date de péremption (EXP) sur votre stylo UnoReady de Cosentyx. **Ne pas utiliser** le stylo si la **date de péremption** est dépassée.

Vérifier que votre stylo contient le bon médicament et le bon dosage.

Contactez votre pharmacien si le stylo ne respecte pas l'une de ces conditions.

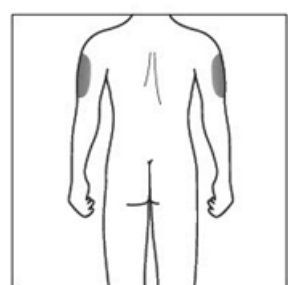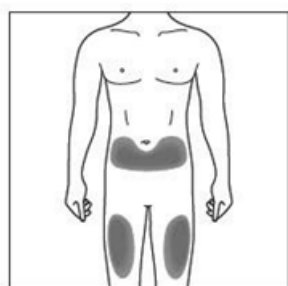

### 2a. Choisissez le site d'injection:

- Le site recommandé est le dessus de vos cuisses. Vous pouvez également faire l'injection au niveau du ventre, **sauf** dans un rayon de 5 centimètres autour du nombril.
- Choisissez un site différent à chaque injection.
- Ne faites pas d'injection aux endroits où la peau est sensible, présente des hématomes, est rouge, présente une desquamation (peaux mortes) ou est dure. Évitez les endroits présentant des cicatrices et des vergetures.


### 2b. Aidants et professionnels de santé uniquement :

- Si l'injection est réalisée par un **aidant** ou un **professionnel de santé**, ils peuvent également faire l'injection dans la partie supérieure externe de votre bras.

### 3. Nettoyez le site d'injection :


- Lavez-vous les mains au savon et à l'eau chaude.
- En effectuant des mouvements circulaires, nettoyez le site d'injection avec la compresse imbibée d'alcool. Laissez la peau sécher avant de procéder à l'injection.
- Ne touchez plus la zone nettoyée avant l'injection.

## Administration de l'injection :

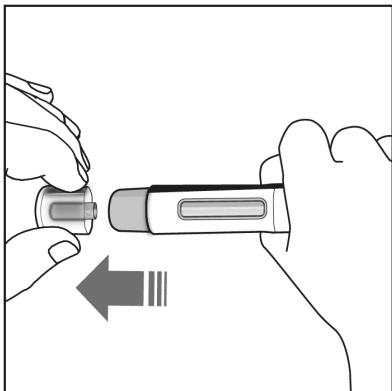


### 4. Retirez le capuchon :

- Ne retirez le capuchon que lorsque vous êtes prêt(e) à utiliser le stylo.
- Tirez le capuchon tout droit dans la direction de la flèche présentée dans le schéma de gauche.
- Une fois le capuchon retiré, jetez-le. N'essayez pas de remettre le capuchon.
- Utilisez le stylo dans les 5 minutes qui suivent le retrait du capuchon.

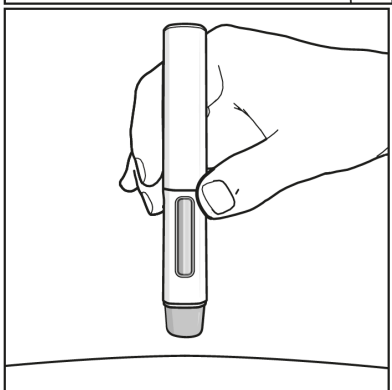


### 5. Positionnez le stylo :

- Tenez le stylo à angle droit (90 degrés) par rapport au site d'injection nettoyé.

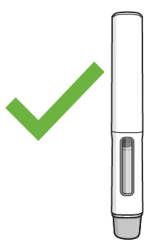

Correct

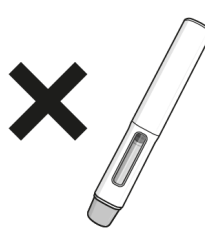

Incorrect




### À LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INJECTION.

Pendant l'injection, vous entendrez **2 clics**.


Le **1<sup>er</sup> clic** indique que l'injection a commencé. Quelques secondes plus tard, un **2<sup>e</sup> clic** vous indiquera que l'injection est **presque** finie.

Vous devez maintenir fermement le stylo contre votre peau jusqu'à ce qu'un **indicateur vert avec un embout gris** remplisse la fenêtre et s'arrête de bouger.

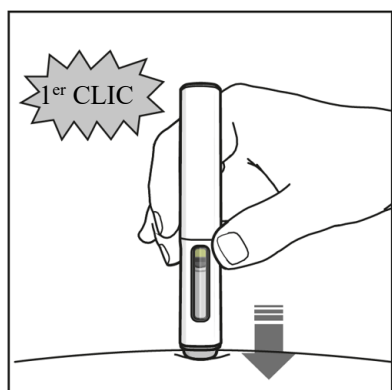

### 6. Commencez l'injection :


- Appuyez fermement le stylo contre votre peau pour commencer l'injection.
- Le **1<sup>er</sup> clic** indique que l'injection a commencé.
- **Maintenez** le stylo appuyé fermement contre votre peau. L'**indicateur vert avec un embout gris** indique la progression de l'injection.

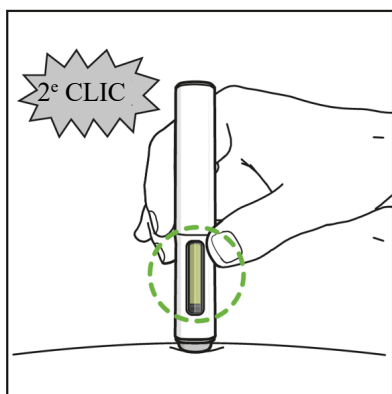

#### 7. Terminez l'injection :

- Attendez d'entendre le **2<sup>e</sup> clic**. Celui-ci vous indique que l'injection est **presque** finie.
- Vérifiez que l'**indicateur vert avec l'embout gris** a rempli la fenêtre et ne bouge plus.
- Le stylo peut maintenant être retiré.

#### Après votre injection :

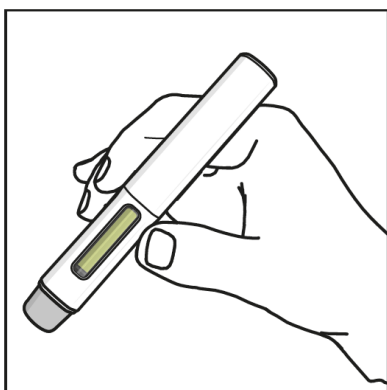

#### 8. Vérifiez que l'indicateur vert a rempli la fenêtre :

- Cela signifie que le médicament a été administré. Contactez votre médecin si l'indicateur vert n'est pas visible.
- Il peut y avoir un peu de sang au niveau du site d'injection. Vous pouvez exercer une pression sur le site d'injection avec un morceau de coton ou une compresse pendant 10 secondes. Ne frottez pas votre peau au niveau du site d'injection. Vous pouvez appliquer un petit pansement sur le site d'injection, si nécessaire.



#### 9. Jetez le stylo UnoReady de Cosentyx 300 mg :

- Jetez le stylo usagé dans un collecteur pour objets tranchants (c'est-à-dire, un récipient refermable et résistant à la perforation, ou similaire).
- N'essayez jamais de réutiliser votre stylo.