

Указания за употреба на Cosentyx 300 mg UnoReady® писалка
секукинумаб



Прочетете внимателно указанията ОТ НАЧАЛО ДО КРАЙ, преди поставяне на инжекцията.

Тези указания са предназначени да Ви помогнат да се инжектирате правилно с писалката Cosentyx UnoReady.

Важно е да не се опитвате да се инжектирате сами без да сте били обучени от Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Вашата Cosentyx 300 mg UnoReady писалка:



Cosentyx 300 mg UnoReady писалка е показана по-горе със свалена капачка. **Не** сваляйте капачката, докато не сте готови да поставите инжекцията.

Не използвайте писалката Cosentyx UnoReady, ако запечатката на картонената кутия е повредена.

Съхранявайте писалката Cosentyx UnoReady в запечатаната картонена опаковка, докато не сте готови да я използвате, за да се предпази от светлина.

Съхранявайте Вашата писалка Cosentyx UnoReady в **хладилник** между 2°C и 8°C и **на място, недостъпно за деца.**


- **Не замразявайте** писалката.
- **Не разклащайте** писалката.
- Не използвайте писалката, ако е била **изпусната** след като капачката е била свалена.

Иглата е покрита от предпазителя на иглата и не се вижда. Не докосвайте и не натискайте предпазителя на иглата, защото иглата може да Ви нарани.

От какво се нуждаете за Вашата инжекция:

Включени в опаковката:

Нова, неизползвана Cosentyx 300 mg UnoReady писалка.

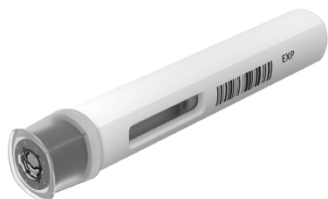

Невключени в опаковката:

- тампон, напоен със спирт.
- памучен тампон или марля.
- контейнер за остри предмети.



Преди поставяне на инжекцията:

Извадете Cosentyx 300 mg UnoReady писалка от хладилника **30 до 45 минути преди поставяне**

на инжекцията, за да може да достигне стайна температура.



1. Важни проверки, свързани с безопасността, преди да си поставите инжекцията:

В “Прозорчето за наблюдение”:

Течността трябва да е бистра. Цветът ѝ може да варира от безцветен до леко жълт.



Да не се използва, ако течността съдържа лесно видими частици, ако е мътна или видимо кафява. Възможно е да видите малко въздушно мехурче, което е нормално.

За „Срок на годност“:

Погледнете срока на годност (EXP) върху Вашата Cosentyx UnoReady писалка. **Не използвайте** писалката, ако **сроктът на годност** е изтекъл.

Проверете дали Вашата писалка съдържа правилното лекарство и доза.

Свържете се с Вашия фармацевт, ако писалката не издържа някоя от тези проверки.

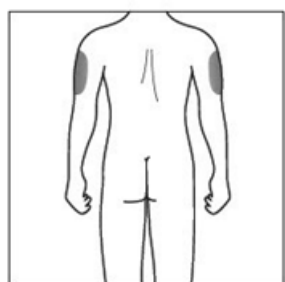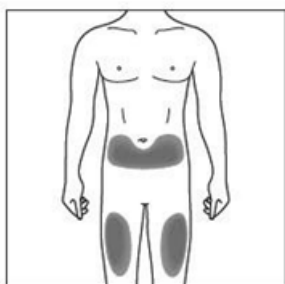

2а. Изберете си място на инжектиране:

- Препоръчителното място е предната част на бедрата. Можете също така да използвате долната част на корема, но **не** и областта на 5 сантиметра около пъпа.
- Всеки път, когато си поставяте инжекцията изберайте различно място.
- Не поставяйте инжекцията в области, където кожата е болезнена, насинена, зачервена, бели се или е втвърдена. Избягвайте области с белези или стрии.


2б. Само за болногледачи и медицински специалисти:

- Ако **болногледач или медицински специалист** Ви поставя инжекцията, може да се използва също така и външната част на горната част на ръката.

3. Почистване на мястото на инжектиране:


- Измийте ръцете си със сапун и топла вода.
- С помощта на кръгови движения почистете мястото на инжектиране с тампон, напоен със спирт. Изчакайте го да изсъхне преди поставяне на инжекцията.
- Не пипайте почистената област, преди поставяне на инжекцията.

Вашата инжекция:

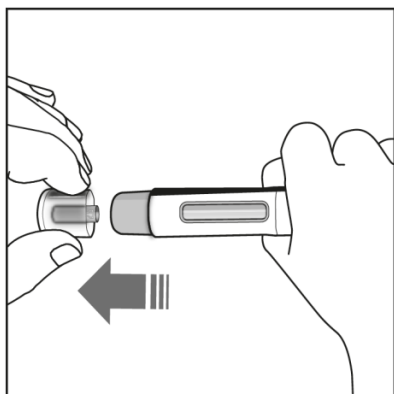


4. Махнете капачката:

- Махайте капачката само, когато сте готови да използвате писалката.
- Издърпайте капачката без да я огъвате, по посока на стрелката, както е показано на фигурата вляво.
- След като свалите капачката, я изхвърлете. Не се опитвайте да я поставите отново.
- Използвайте писалката в рамките на 5 минути след махането на капачката.

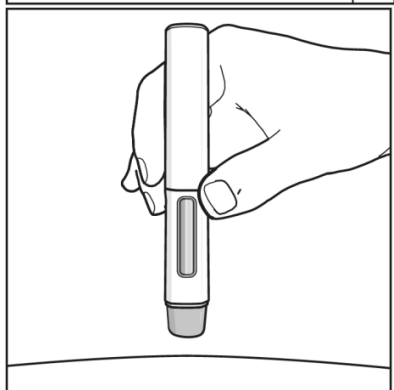


5. Как се държи писалката:

- Дръжте писалката под ъгъл 90 градуса спрямо почистеното място на инжектиране.

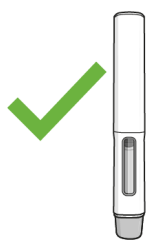

Правилно

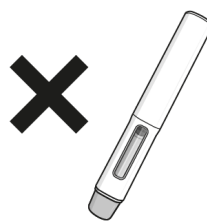

Неправилно




ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА ПРЕДИ ПОСТАВЯНЕ НА ИНЖЕКЦИЯТА.

По време на поставянето на инжекцията ще чуете **2 щраквания**.


1-вото щракване показва, че инжектирането е започнало. Няколко секунди по-късно **2-ро щракване** ще покаже, че инжектирането е **почти завършено**.

Трябва да продължите да притискате писалката плътно към кожата, докато видите **зелен индикатор със сив връх** да изпълва прозорчето и да спира да се движи.

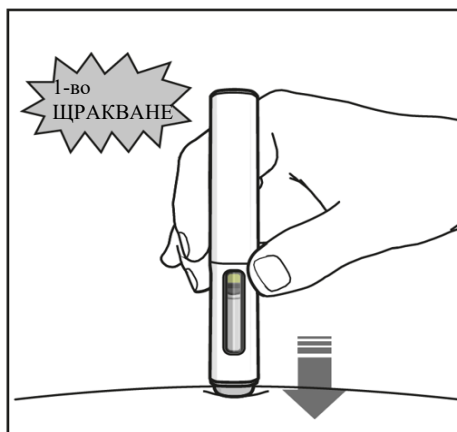

6. Започване на инжектирането:


- Притиснете писалката плътно към кожата, за да започнете инжектирането.
- **1-вото щракване** показва, че инжектирането е започнало.
- **Продължете да притискате писалката плътно към кожата.**
Зеленият индикатор със сив връх показва хода на инжектирането.

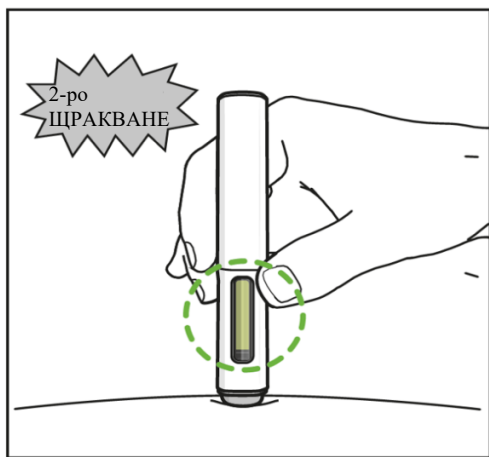

7. Завършване на инжектирането:


- Ослушвайте се за **2-рото шпакване**. То показва, че инжектирането е **почти** завършено.
- Проверете дали **зеленият индикатор със сив връх** е изпълнил прозорчето и дали е спрял да се движи.
- Писалката вече може да бъде махната.

След поставяне на инжекцията:

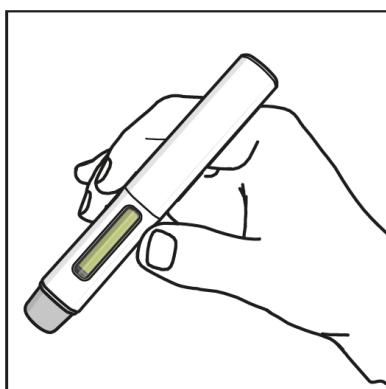

8. Проверете, дали зеленият индикатор изпълва прозорчето:

- Това означава, че лекарството е поставено. Консултирайте се с Вашия лекар, ако зеленият индикатор не се вижда.
- Възможно е да има малко количество кръв на мястото на инжектиране. Можете да поставите памучен тампон или марля върху мястото и да притиснете за 10 секунди. Не разтривайте мястото на инжектиране. Може да го покриете с малка лепенка, ако е необходимо.

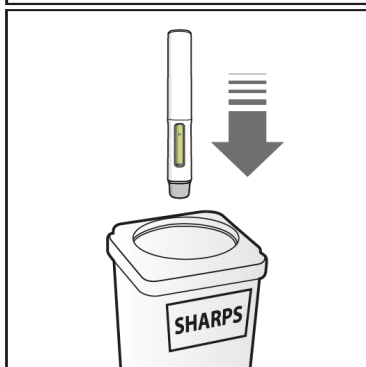

9. Изхвърляне на Cosentyx 300 mg UnoReady писалка:

- Изхвърлете използваната писалка в контейнер за остри предмети (напр. затварящ се, непробиваем контейнер или нещо подобно).
- Никога не използвайте повторно писалката.