

Upute za uporabu Cosentyx 150 mg SensoReady brizgalice



Cosentyx 150 mg SensoReady brizgalica

Otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Sekukinumab

Upute bolesniku za uporabu




Pročitajte ove upute DO KRAJA prije nego što primijenite injekciju.

Svrha ovih uputa je da Vam pomognu pravilno ubrizgati lijek korištenjem Cosentyx SensoReady brizgalice.

Važno je da ne pokušavate dati injekciju sami sebi ili osobi koju negujete dok Vas nisu tome poučili Vaš liječnik, medicinska sestra ili ljekarnik.

Vaša Cosentyx 150 mg SensoReady brizgalica:

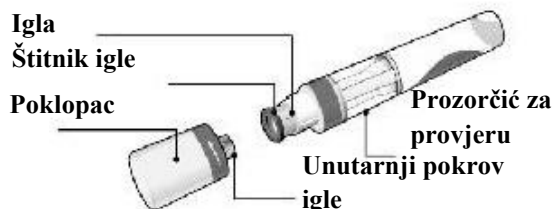

Cosentyx 150 mg SensoReady brizgalica prikazana s uklonjenim poklopcem. **Nemojte** uklanjati poklopac dok niste spremni ubrizgati lijek.

Čuvajte kutiju sa svojom brizgalicom u **hladnjaku** na temperaturi između 2 °C i 8 °C te **izvan dohvata djece**.


- **Ne zamrzavajte** brizgalicu.
- **Ne tresite** brizgalicu.
- Ne koristite brizgalicu ako Vam je **pala** nakon što je poklopac uklonjen.

Za manje nelagodnu injekciju izvadite brizgalicu iz hladnjaka **15-30 minuta prije ubrizgavanja** kako bi mogla doseći sobnu temperaturu.

Što Vam treba za injekciju:

Uključeno u kutiju:

Nova i neupotrijebljena Cosentyx 150 mg SensoReady brizgalica (1 brizgalica je potrebna za dozu od 150 mg, a 2 brizgalice su potrebne za dozu od 300 mg).

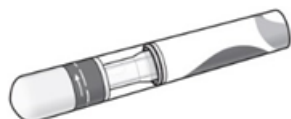

Nije uključeno u kutiju:


- Alkoholni tupfer.
- Pamučna vata ili gaza.
- Spremnik za odlaganje oštih predmeta.



Prije primjene injekcije:

1. Važne sigurnosne provjere prije nego što si date injekciju:

Tekućina treba biti bistra. Boja joj može varirati od bezbojne do žućkaste.

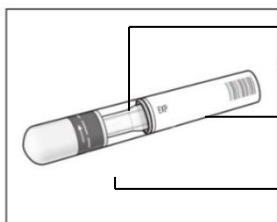


Ne upotrebljavajte ako tekućina sadrži lako vidljive čestice, ako je zamućena ili izrazito smeđa. Možda ćete vidjeti mjehurić zraka, što je normalno.

Ne upotrebljavajte brizgalicu ako je istekao **rok valjanosti**.


Ne upotrebljavajte ako je **sigurnosna naljepnica** potrgana.

Obratite se svom ljekarniku ako brizgalica ne prođe bilo koju od ovih provjera.

2a. Odaberite mjesto primjene injekcije:

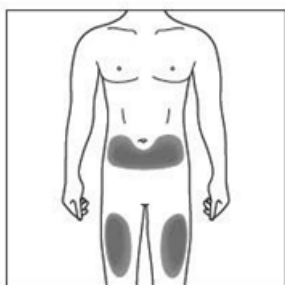

- Preporučeno mjesto je prednja strana bedara. Možete iskoristiti i donji dio trbuha, ali **ne** područje 5 centimetara oko pupka.
- Odaberite drugo mjesto svaki put kada si dajete injekciju.
- Nemojte ubrizgavati lijek u područja na kojima je koža osjetljiva, s modricama, crvena, ljuskasta ili tvrda. Izbjegavajte područja s ožiljcima ili strijama.

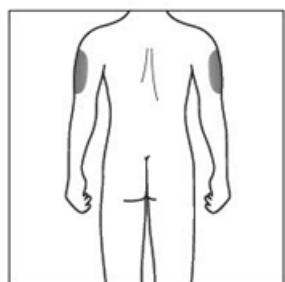

2b. Samo za njegovatelje i zdravstvene radnike:


- Ako Vam **njegovatelj** ili **zdravstveni radnik** daju injekciju, mogu Vam je dati i u vanjski dio nadlaktice.



3. Čišćenje mjesta primjene injekcije:

- Operite ruke sapunom i vrućom vodom.
- Kružnim pokretima očistite mjesto primjene alkoholnim tupferom. Pustite da se osuši prije primjene injekcije.
- Ne dirajte ponovno očišćeno područje prije primjene injekcije.

Vaša injekcija:

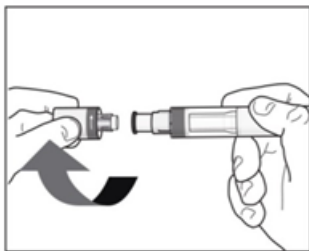

4. Skidanje poklopca:

- Skinite poklopac tek kad ste spremni upotrijebiti brizgalicu.
- Poklopac skinite okretom u smjeru strelica.
- Nakon što ga skinete, odložite poklopac. **Ne pokušavajte ponovno staviti poklopac.**
- Upotrijebite brizgalicu u roku od 5 minuta nakon što skinete poklopac.



5. Držanje brizgalice:

- Držite brizgalicu pod kutem od 90 stupnjeva u odnosu na očišćeno mjesto primjene.



Pravilno



Nepravilno




MORATE OVO PROČITATI PRIJE PRIMJENE INJEKCIJE.

Tijekom injekcije čut ćete **2 glasna klika**.


Prvi klik označava da je injekcija započela. Nekoliko sekundi kasnije **drugi klik** označit će da je injekcija **skoro** gotova.

Morate i dalje držati brizgalicu čvrsto uz kožu dok ne vidite da je **zeleni indikator** ispunio prozorčić i prestao se micati.

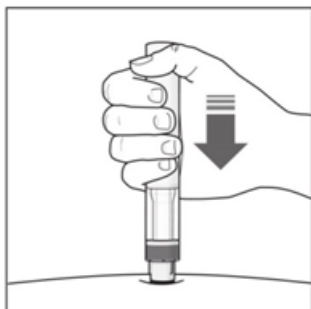

6. Početak injekcije:

- Pritisnite brizgalicu čvrsto na kožu da biste započeli injekciju.
- **Prvi klik** označava da je injekcija započela.
- **Nastavite držati** brizgalicu čvrsto uz kožu.
- **Zeleni indikator** pokazuje napredovanje injekcije.

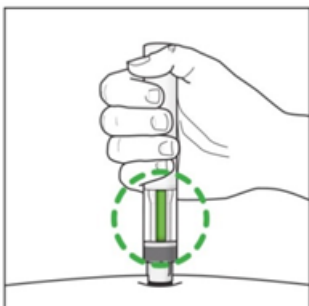

7. Završetak injekcije:


- Pričekajte da čujete **drugi klik**. On označava da je injekcija **skoro** gotova.
- Provjerite je li **zeleni indikator** ispunio prozorčić i prestao se micati.
- Brizgalice se sada može maknuti.

Nakon injekcije:



8. Provjerite je li zeleni indikator ispunio prozorčić:

- To znači da je lijek ubrizgan. Obratite se svom liječniku ako zeleni indikator nije vidljiv.
- Na mjestu primjene moglo bi biti malo krvi. Možete pritisnuti pamučnu vatu ili gazu na mjesto primjene i držati je 10 sekundi. Ne trljajte mjesto primjene. Možete pokriti mjesto primjene malim flasterom ako je potrebno.

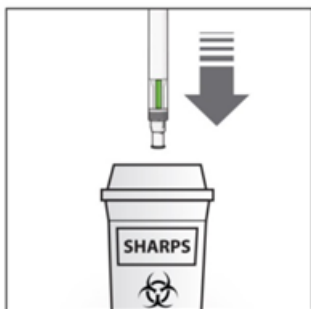

9. Odlaganje Cosentyx SensoReady brizgalice:

- Odložite upotrijebljenu brizgalicu u spremnik za odlaganje oštih predmeta (tj. spremnik koji se može zatvoriti i otporan je na bušenje, ili nešto slično).
- Nikada nemojte pokušavati ponovno upotrijebiti svoju brizgalicu.