

Anvisninger til brug af Cosentyx 300 mg UnoReady-pen

secukinumab




Læs ALLE nedenstående anvisninger, før du begynder.

Formålet med disse anvisninger er at hjælpe dig med at foretage korrekt indsprøjtning ved hjælp af Cosentyx UnoReady-pen.

Det er vigtigt, at du ikke forsøger at give dig selv en indsprøjtning, før du er blevet undervist i at gøre det af din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.

Din Cosentyx 300 mg UnoReady-pen:

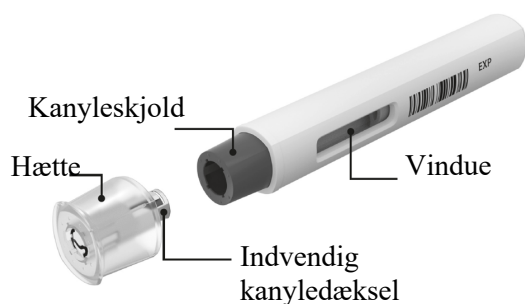

Cosentyx 300 mg UnoReady-pen, vist ovenover med hættten fjernet. Du må **ikke** fjerne kanylehættten, før du er klar til at foretage indsprøjtningen.

Brug ikke Cosentyx UnoReady-pennen, hvis forseglingen på den ydre pakning er brudt.

Opbevar Cosentyx UnoReady-pennen i den forseglede ydre pakning, indtil du er klar til at bruge den, for at beskytte den mod lys.

Opbevar din Cosentyx UnoReady-pen i et køleskab ved temperaturer mellem 2 °C - 8 °C, **og uden for børns rækkevidde.**

- Pennen **må ikke nedfryses.**
- Pennen **må ikke rystes.**
- Pennen må ikke anvendes, hvis den har været **tabt** med hættten fjernet.

Kanylen er dækket af kanyleskjoldet, og kanylen ses ikke. Rør eller skub ikke ved kanyleskjoldet, da du kan komme til at stikke dig selv.

Det har du brug for til indsprøjtningen:


Medfølger i pakningen:

En ny og ubrugt Cosentyx 300 mg UnoReady-pen.




Medfølger ikke i pakningen:

- Spritserviet
- Vatkugle eller gaze
- Kanyleboks til bortskaffelse af skarpe genstande

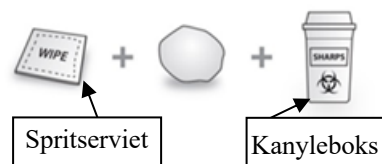

Før indsprøjtning:

Tag Cosentyx 300 mg UnoReady-pen ud af køleskabet **30-45 minutter før indsprøjtning**, så den opnår stuetemperatur.

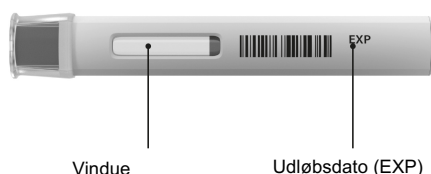

1. Vigtigt sikkerhedstjek, før du foretager indsprøjtningen:

For “Vindue”:

Væsken skal være klar. Farven kan variere fra farveløs til let gul.



Må ikke bruges, hvis væsken indeholder umiddelbart synlige partikler, er uklar eller er tydeligt brun. Der kan være en lille, synlig luftboble, hvilket er helt normalt.

For “Udløbsdato”:

Kig på udløbsdatoen (EXP) på din Cosentyx UnoReady-pen. **Brug ikke** pennen, hvis **udløbsdatoen** er overskredet.

Kontrollér, at din pen indeholder det korrekte lægemiddel og dosis.

Kontakt apotekspersonalet, hvis pennen ikke overholder et eller flere af disse sikkerhedstjek.

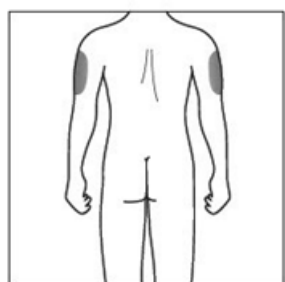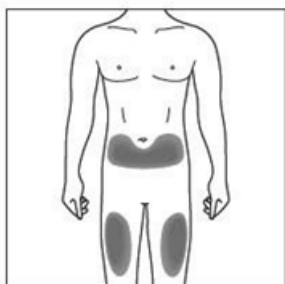

2a. Vælg dit indsprøjtningssted:

- Det anbefalede sted er forsiden af låret. Du kan også bruge den nederste del af maven, men **ikke** området 5 cm omkring navlen.
- Vælg et nyt sted, hver gang du giver dig selv en indsprøjtning.
- Brug ikke områder, hvor huden er øm, har blå mærker, er rød, skællet eller er hård. Undgå også områder med ar eller strækmærker.


2b. Kun for omsorgspersoner og sundhedspersoner:

- Hvis det er en **omsorgsperson** eller **sundhedsperson**, der giver dig din indsprøjtning, kan de også bruge ydersiden af din overarm.

3. Rensning af indsprøjtningsstedet:


- Vask hænderne med varmt vand og sæbe.
- Rens indsprøjtningssedet med spritservietten; brug en cirkulende bevægelse. Lad det tørre, før du foretager indsprøjtningen.
- Rør ikke ved det rensede område, før du skal foretage indsprøjtningen.

Din indsprøjtning:

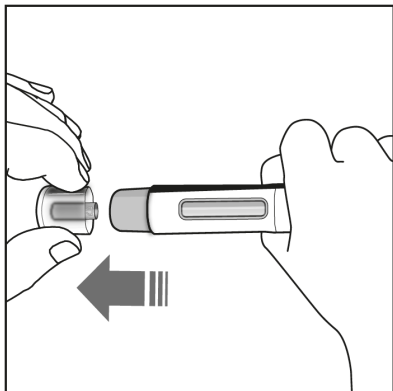


4. Fjern hættten:

- Fjern først hættten, når du er klar til at bruge pennen.
- Træk hættten lige af i pilens retning, som det er vist i figuren til venstre.
- Når hættten først er fjernet, skal du smide den ud. Forsøg ikke at sætte hættten på igen.
- Du skal bruge pennen inden for 5 minutter, efter du har fjernet hættten.

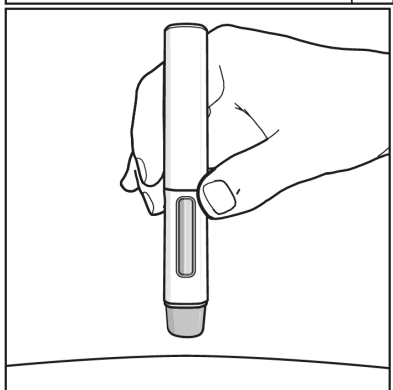


5. Sådan holder du din pen:

- Hold pennen i en vinkel på 90 grader i forhold til det rensede indsprøjtningsssted.

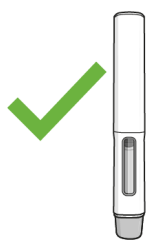

Rigtigt

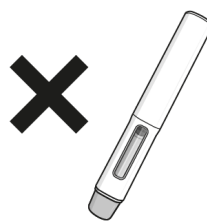

Forkert




LÆS DETTE, FØR DU BEGYNDER

Mens du foretager indsprøjtningen, vil du høre **2 klik**.


Det **første klik** markerer, at indsprøjtningen er begyndt. Flere sekunder senere lyder det **andet klik**, der markerer, at indsprøjtningen **næsten** er afsluttet.

Du skal blive ved med at holde pennen fast ind imod din hud, indtil du ser en **grøn indikator med en grå spids** fylde vinduet og til sidst stopper med at bevæge sig.

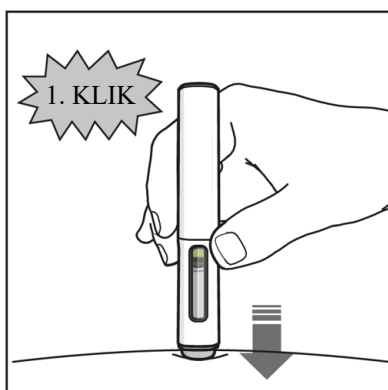

6. Sådan begynder du indsprøjtningen:


- Pres pennen fast ind mod huden for at begynde indsprøjtningen.
- Det **første klik** markerer, at indsprøjtningen er begyndt.
- **Bliv ved med at holde** pennen fast ind mod din hud. Den **grønne indikator med den grå spids** viser, hvor langt indsprøjtningen er nået.

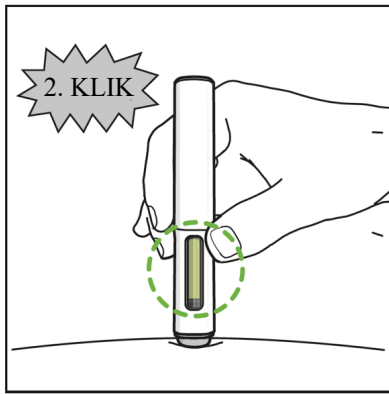

7. Sådan afslutter du indsprøjtningen:


- Lyt efter det **andet klik**. Det markerer, at indsprøjtningen **næsten** er afsluttet.
- Kontrollér, at den **grønne indikator med den grå spids** fylder vinduet og er stoppet med at bevæge sig.
- Nu kan du fjerne pennen.

Efter indsprøjtningen:

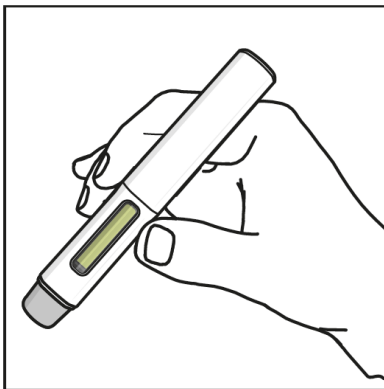

8. Kontrollér, at den grønne indikator fylder vinduet:

- Det betyder, at lægemidlet er blevet indgivet. Kontakt din læge, hvis den grønne indikator ikke er synlig.
- Der kan være en lille smule blod på indsprøjtningssedet. Du kan presse en vatkugle eller noget gaze mod stedet og holde det i 10 sekunder. Lad være med at gnide på det. Hvis det er nødvendigt, kan du dække indsprøjtningssedet med et lille stykke plaster.

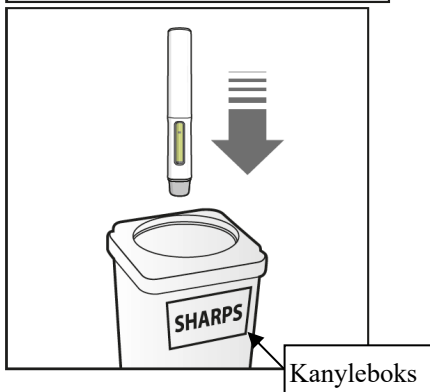

9. Sådan bortskaffer du din Cosentyx 300 mg UnoReady-pen:

- Smid den brugte pen i en kanyleboks til skarpe genstande (dvs. en beholder, der kan aflukkes og ikke kan gennembrydes, eller lignende).
- Forsøg aldrig at genbruge din pen.