

Cosentyx 300 mg UnoReady -kynän käyttöohjeet

sekukinumabi




Lue nämä käyttöohjeet KOKONAAN ennen pistämistä.

Nämä ohjeet auttavat sinua käyttämään Cosentyx UnoReady -kynää oikein.

On tärkeää, ettet yritä pistää lääkettä itsellesi ennen kuin lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle oikean pistämistavan.

Cosentyx 300 mg UnoReady -kynä:

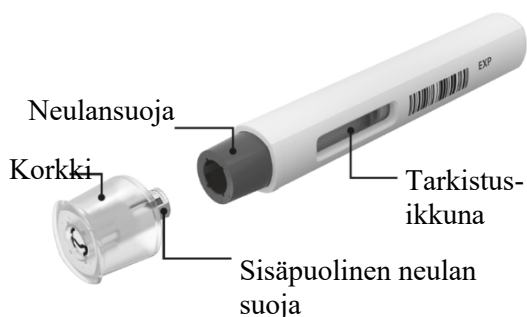

Cosentyx 300 mg UnoReady -kynä, josta korkki on poistettu. **Älä** poista korkkia ennen kuin olet valmis pistämään.

Älä käytä Cosentyx UnoReady -kynää, jos ulkopakkauksen sinetti on rikkoutunut.

Säilytä Cosentyx UnoReady -kynä sinetöidyssä ulkopakkauksessa valolta suojassa, kunnes aiot käyttää sen.

Säilytä Cosentyx Uno Ready -kynä **jääkaapissa** (2 °C - 8 °C) ja **poissa lasten ulottuvilta**

- Kynä **ei saa jäätyä**.
- **Älä ravista** kynää.
- Älä käytä kynää, jos se on **pudonnut** korkin poistamisen jälkeen.

Neula ei ole näkyvässä, vaan sitä suojaa neulansuoja. Älä koske tai paina neulansuojaa, koska voit saada pistovamman.

Pistoksen antamiseen tarvitset:

Toimitetaan pakkauksen mukana:

Uusi ja käyttämätön Cosentyx 300 mg UnoReady -kynä.




Ei toimiteta pakkauksen mukana:

- antiseptinen pyyhe.
- pumpulia tai sideharsoa
- neuloille ja ruiskuille tarkoitettu astia.



Ennen pistämistä:

Ota Cosentyx 300 mg UnoReady -kynä jääkaapista **30-45 minuuttia ennen pistämistä** ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi.

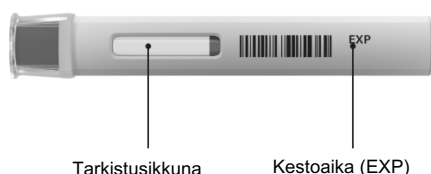

1. Tärkeitä turvallisuustarkistuksia ennen pistämistä:

Tarkistusikkuna:

Nesteen pitää olla kirkasta. Väri voi vaihdella värittömästä hieman kellertävään.



Älä käytä nestettä, jos se sisältää selvästi näkyviä hiukkasia, neste on sameaa tai selvästi ruskeaa. Saatat havaita pienen ilmakuplan, mikä on normaalia.

Kestoaika:

Tarkista Cosentyx UnoReady -kynän kesto aika (EXP). **Älä käytä** kynää, jos **kesto aika** on umpeutunut.

Tarkasta, että kynä sisältää oikeaa lääkettä ja oikean annoksen.

Ota yhteyttä apteekkiin, jos havaitset kynässä jonkin edellä mainituista vioista.

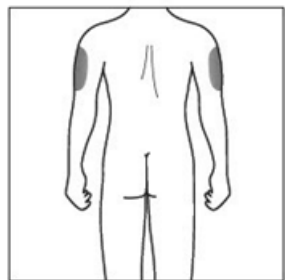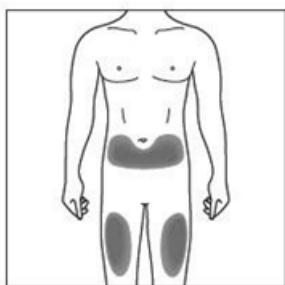

2a. Pistoskohdan valitseminen:

- Suositeltu pistoskohta on etureisi. Voit pistää myös alavatsan alueelle, **lukuun ottamatta** 5 cm:n aluetta navan ympärillä.
- Valitse uudelle pistokselle aina uusi pistoskohta.
- Älä pistä kohtaan, joka aristaa, punoittaa, hilseilee, tuntuu kovalta tai jossa on mustelma. Vältä kohtia, joissa on arpikudosta tai iho on venynyt.


2b. Vain huoltajat ja terveydenhuollon ammattilaiset:

- Jos pistoksen antaa **huoltaja** tai **terveydenhuollon ammattilainen**, pistos voidaan antaa myös olkapäiden ulkopinnalle.

3. Pistoskohdan puhdistaminen:


- Pese kädet saippualla ja kuumalla vedellä.
- Puhdista pistoskohta antiseptisellä pyyhkeellä käyttäen pyörivää liikettä. Anna kohdan kuivua ennen pistämistä.
- Älä enää koske puhdistettuun alueeseen ennen pistämistä.

Pistos:

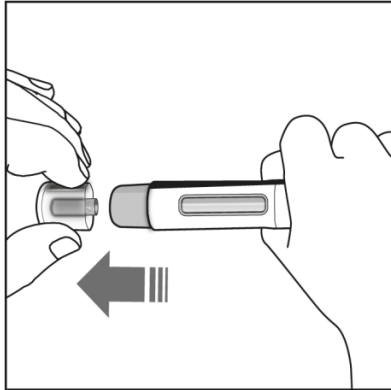


4. Korkin poistaminen:

- Poista korkki vasta, kun olet valmis käyttämään kynän.
- Irroita korkki vetämällä suoraan vasemmalla olevan kuvan nuolen osoittamaan suuntaan.
- Hävitä poistamasi korkki. Älä yritä kiinnittää korkkia uudelleen.
- Käytä kynä 5 minuutin kuluessa korkin poistamisesta

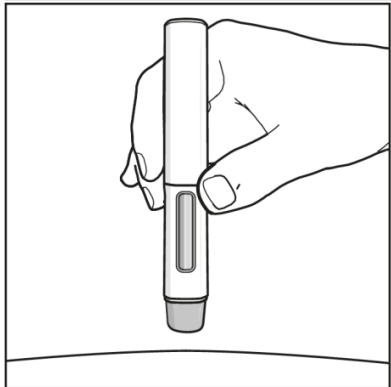


5. Miten suuntaat kynän:

- Suuntaa kynä 90 asteen kulmassa puhdistettuun pistoskohtaan.

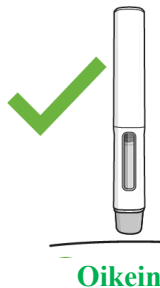

Oikein

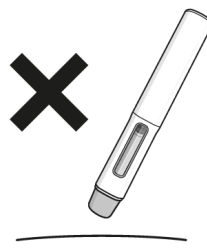

Väärin




SINUN ON LUETTAVA TÄMÄ KOHTA ENNEN PISTÄMISTÄ.

Pistoksen aikana kuulet **kaksi naksahdusta**.


Kun kuulet **ensimmäisen naksahduksen**, pistos on aloitettu. Useita sekunteja myöhemmin kuuluva **toinen naksahdus** kertoo, että pistos on **lähös** valmis.

Sinun täytyy jatkaa kynän painamista tiiviisti ihoa vasten, kunnes näet, että **vihreä ilmaisin, jossa on harmaa kärki**, on täyttänyt ikkunan eikä enää liiku.

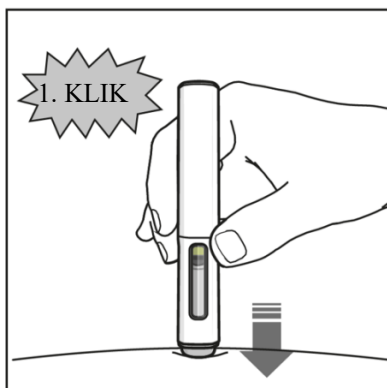

6. Pistoksen aloittaminen:


- Paina kynää tiiviisti ihoa vasten pistoksen aloittamiseksi.
- Kun kuulet **ensimmäisen naksahduksen**, pistos on aloitettu.
- **Pidä edelleen** kynää tiiviisti ihoa vasten painettuna.
- **Vihreä ilmaisin, jossa on harmaa kärki** kertoo pistoksen etenemisestä.

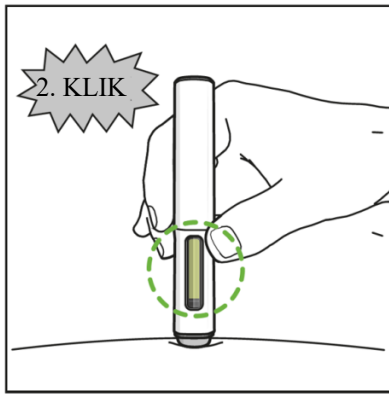

7. Pistoksen antaminen kokonaan:


- Kuuntele, kunnes kuulet **toisen naksahduksen**. Se merkitsee, että pistos on **lähes** valmis.
- Tarkista, että **vihreä ilmaisin, jossa on harmaa kärki** täyttää ikkunan eikä enää liiku.
- Voit nyt poistaa kynän.

Pistoksen jälkeen:

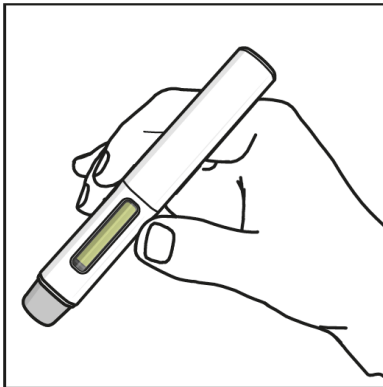

8. Tarkista, että vihreä ilmaisin täyttää ikkunan:

- Se tarkoittaa, että lääke on vapautunut. Ota yhteyttä lääkäriin, jos vihreää ilmaisinta ei näy.
- Pistoskohdassa saattaa olla pieni määrä verta. Voit painaa pistoskohtaa pumpulilla tai sideharsolla 10 sekunnin ajan. Älä hankaa pistoskohtaa. Voit tarvittaessa peittää pistoskohdan pienellä laastarilla.

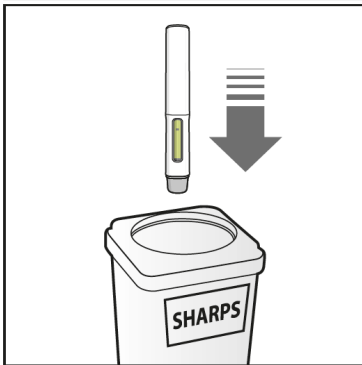

9. Cosentyx 300 mg UnoReady -kynän hävittäminen:

- Hävitä käytetty kynä laittamalla se käytetyille neuloille ja ruiskuille tarkoitettuun astiaan (pistonkestävään suljettavaan astiaan tai vastaavaan).
- Älä koskaan yritä käyttää kynääsi uudelleen