

Bruksanvisning för Cosentyx 300 mg UnoReady-penna

sekukinumab




Läs HELA bruksanvisningen innan du injicerar.

Dessa anvisningar hjälper dig att injicera Cosentyx på rätt sätt med injektionspennan UnoReady.

Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv om du inte har fått undervisning av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Cosentyx 300 mg UnoReady-penna:

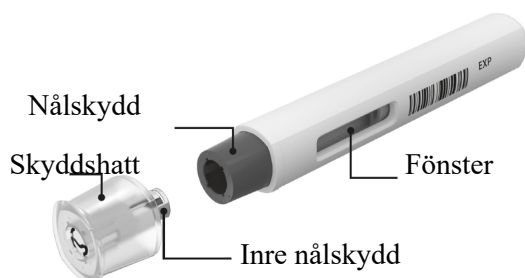

Cosentyx 300 mg UnoReady-penna ovan med skyddshatten avtagen. **Ta inte** bort hatten förrän du är redo att injicera.

Använd inte Cosentyx UnoReady-pennan om förseglingen på ytterkartongen brutits.

Förvara Cosentyx UnoReady-pennan i den förseglade ytterkartongen tills du är redo att använda den. Ljuskänslig.

Förvara din Cosentyx UnoReady-penna i **kylskåp** mellan 2 °C-8 °C och **utom räckhåll för barn**.


- Injektionspennan **får inte frysas**.
- **Skaka inte** injektionspennan.
- Använd inte injektionspennan om den har **tappats** med skyddshatten avtagen.

Nålen täcks av nålskyddet och nålen syns inte. Rör inte vid eller tryck på nålskyddet eftersom du kan få en nålstickskada.

Tillbehör som du behöver för injektionen:


Ingår i förpackningen:

En ny och oanvänd Cosentyx 300 mg UnoReady-penna.

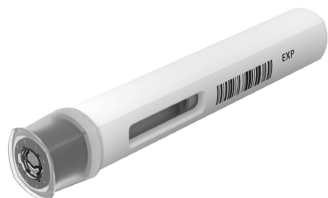

Ingår inte i förpackningen:


- Spritkompress.
- Bomullstuss eller kompress.
- Behållare för riskavfall.

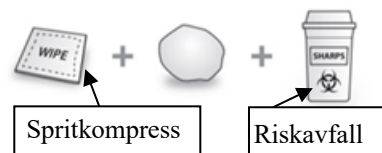

Före injektionen:

Ta ut Cosentyx 300 mg UnoReady-pennan ur kylskåpet **30 till 45 minuter före injektionen** så att den

när rumstemperatur.

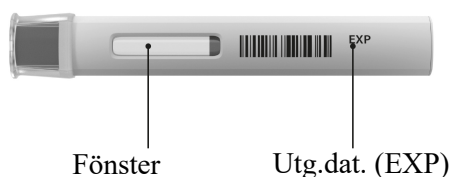

1. Viktig säkerhetskontroll före injektionen:

För "Fönster":

Vätskan ska vara klar. Färgen kan variera från ofärgad till svagt gul.



Använd inte om vätskan innehåller tydligt synbara partiklar, är grumlig eller tydligt brun. Eventuellt kan en liten luftbubbla synas, vilket är normalt.

För "Utgångsdatum (Utg.dat.)":

Titta på utgångsdatumet (EXP) på din Cosentyx UnoReady-penna. **Använd** injektionspennan före **utgångsdatum**.

Kontrollera att din penna innehåller rätt läkemedel och dos.

Kontakta apotekspersonal om injektionspennan inte uppfyller dessa krav.

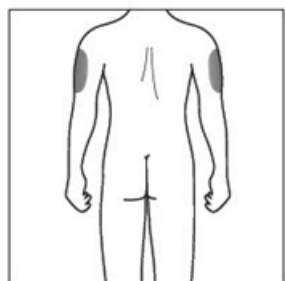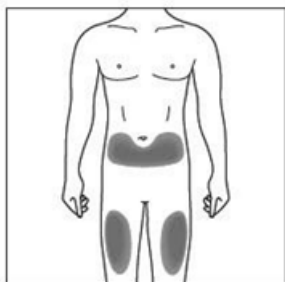

2a. Välj injektionsställe:

- Rekommenderat injektionsställe är lårens framsida. Du kan också använda nedre delen av buken, men **inte** området inom 5 cm från naveln.
- Välj olika ställen varje gång du injicerar.
- Injicera inte i områden med blåmärken eller där huden är öm, röd, fjällande eller hård. Undvik områden med ärr eller bristningar.


2b. Endast för vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal:

- Om en **vårdgivare** eller **hälso- och sjukvårdspersonal** ger injektionen kan även utsidan av överarmarna användas.

3. Tvätta injektionsstället:


- Tvätta händerna med tvål och vatten.
- Tvätta injektionsstället med en cirklande rörelse med spritkompressen. Låt torka innan du injicerar.
- Rör inte det rengjorda området förrän du injicerar.

Injektionen:

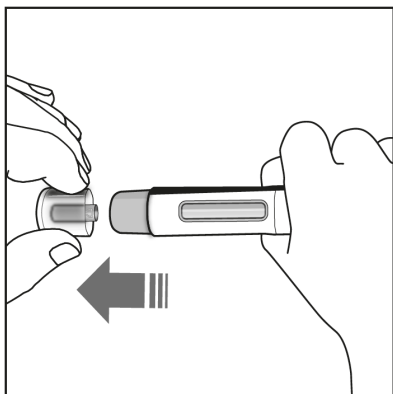

4. Ta av nålskyddet:

- Ta inte av skyddshatten förrän du är redo att använda injektionspennan.
- Dra hatten rakt av i pilens riktning som visas i bilden till vänster.
- Kasta hatten när du har tagit av den. Försök inte att sätta på hatten igen.
- Använd injektionspennan inom 5 minuter från det att hatten tagits av.

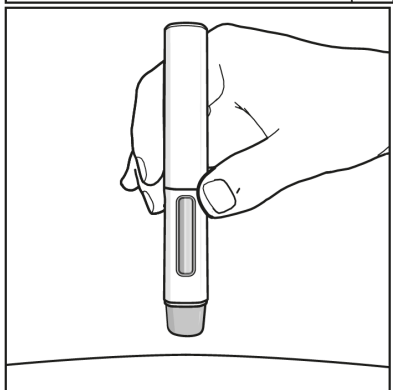


5. Så här håller du injektionspennan:

- Håll injektionspennan i 90 graders vinkel mot det rengjorda injektionsstället.



Rätt

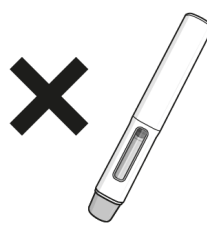

Fel




DETTA MÅSTE DU LÄSA INNAN DU INJICERAR.

Under injektionen kommer du att höra **2 klickljud**.


Det **första klickljudet** talar om att injektionen har startat. Några sekunder senare talar ett **andra klickljud** om att injektionen **nästan** är klar.

Du måste fortsätta att hålla injektionspennan stadigt mot huden tills du ser en **grön indikator med en grå spets** fylla fönstret och sluta röra sig.

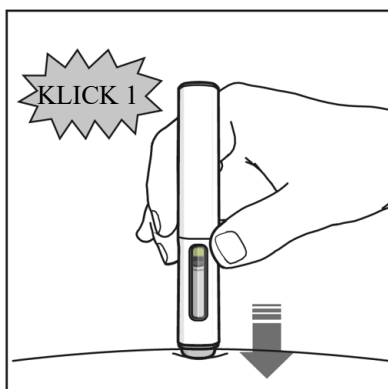

6. Starta injektionen:


- Tryck injektionspennan stadigt mot huden för att starta injektionen.
- Det **första klickljudet** talar om att injektionen har startat.
- **Fortsätt att trycka** injektionspennan stadigt mot huden.
- Den **gröna indikatorn med den grå spetsen** visar hur injektionen fortskrider.

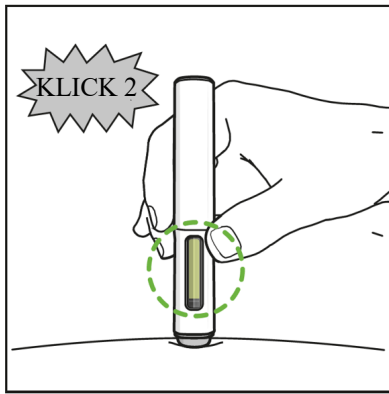

7. Avsluta injektionen:


- Lyssna efter det **andra klickljudet**. Detta talar om att injektionen **nästan** är klar.
- Kontrollera att den **gröna indikatorn med den grå spetsen** fyller fönstret och har slutat röra sig.
- Nu kan du ta bort injektionspennan.

Efter injektionen:

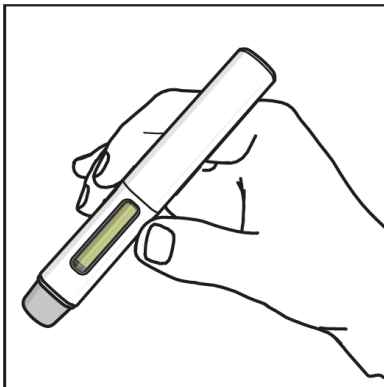

8. Kontrollera att den gröna indikatorn har fyllt fönstret:

- Detta betyder att läkemedlet har injicerats. Kontakta läkaren om den gröna indikatorn inte syns.
- Lite blod kan komma från injektionsstället. Tryck en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället i 10 sekunder. Gnugga inte på injektionsstället. Om det behövs kan du sätta ett plåster på injektionsstället.

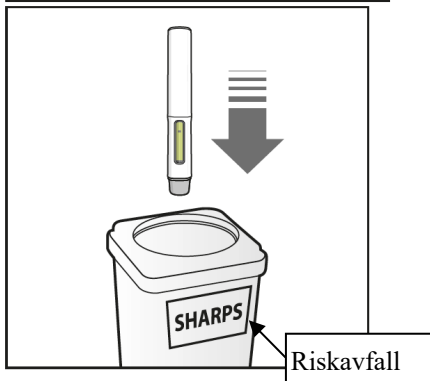

Så här kasserar du din Cosentyx 300 mg UnoReady-penna:

- Kasta den använda injektionspennan i en behållare för riskavfall (dvs. en punktionssäker, förslutningsbar behållare eller liknande).
- Försök aldrig återanvända en injektionspenna.