

## Istruzioni per l'uso della penna UnoReady di Cosentyx 300 mg

secukinumab




**Leggere INTERAMENTE queste istruzioni prima di effettuare l'iniezione.**

Queste istruzioni sono un aiuto per praticare correttamente l'iniezione mediante l'uso della penna UnoReady di Cosentyx.

È importante non tentare di effettuare l'iniezione da soli finché non si saranno ricevute adeguate istruzioni dal medico, dall'infermiere o dal farmacista.

### Aspetto della penna UnoReady di Cosentyx di 300 mg:

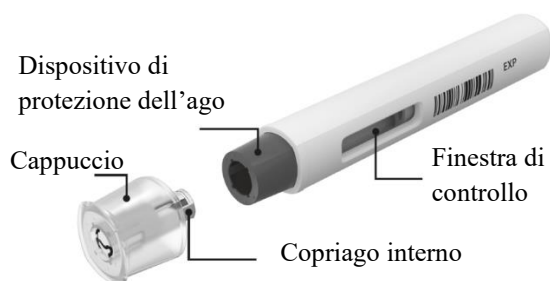

Penna UnoReady di Cosentyx di 300 mg mostrata sopra con il cappuccio rimosso. **Non** rimuovere il cappuccio fino a quando non è pronto per l'iniezione.

**Non usare** Cosentyx penna UnoReady se il sigillo sull'imballaggio esterno è rotto.

Tenere la penna Cosentyx UnoReady nella confezione esterna sigillata fino a quando non si è pronti a usarla, per proteggerla dalla luce.

Conservare la penna Cosentyx UnoReady in **frigorifero** tra 2°C e 8°C e tenerla **fuori dalla portata dei bambini**.

- **Non congelare** la penna.
- **Non agitare** la penna.
- Non usare la penna se è stata **fatta cadere** senza cappuccio.

L'ago è coperto da un dispositivo di protezione e non si vede. Non toccare o spingere il dispositivo di protezione dell'ago perché ci si potrebbe ferire.

### Cosa necessita per l'iniezione:

Incluso nella confezione:

penna UnoReady di Cosentyx di 300 mg nuova e non usata.




Non incluso nella confezione:

- tamponi imbevuti di alcol
- batuffolo di cotone o garza
- contenitore per lo smaltimento di materiali taglienti.



## Prima dell'iniezione:

tolga la penna UnoReady di Cosentyx di 300 mg dal frigorifero **30 - 45 minuti prima dell'iniezione** per consentirle di raggiungere la temperatura ambiente.

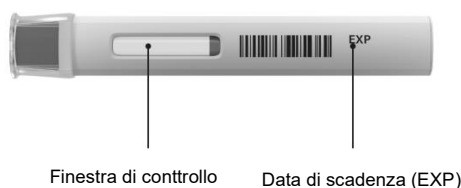

### 1. Importanti controlli di sicurezza prima dell'iniezione:



Per la "Finestra di controllo":  
il liquido deve essere limpido. Il colore può variare da incolore a leggermente giallo.

**Non usare** se il liquido contiene particelle facilmente visibili, è torbido o è chiaramente marrone. Potrebbero essere visibili delle piccole bolle d'aria, il che è normale.

Per la "Data di scadenza":  
controllare la data di scadenza (EXP) sulla penna Cosentyx UnoReady. **Non usare** la penna dopo la **data di scadenza**.

Controllare che la penna contenga il farmaco e la dose corretti.

Contattare il farmacista se la penna non soddisfa uno qualsiasi di questi controlli.

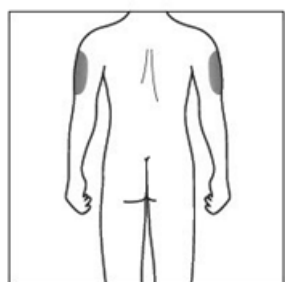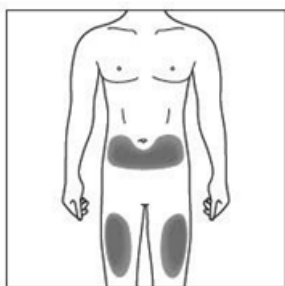

### 2a. Scelta della sede di iniezione

- La sede raccomandata è la parte anteriore delle cosce. Può anche usare il basso addome, ma **non** l'area di 5 centimetri intorno all'ombelico.
- Scegliere una sede differente per ogni nuova iniezione.
- Non iniettare in aree dove la pelle è sensibile, sono presenti lividi, è arrossata, desquamata o indurita. Evitare le aree dove sono presenti cicatrici o smagliature.


### 2b. Solo per le persone che si occupano del paziente e gli operatori sanitari

- Se l'iniezione le viene somministrata **da una persona che la assiste o dagli operatori sanitari**, può essere effettuata anche nella parte superiore esterna delle braccia.

### 3. Pulizia della sede di iniezione


- Lavarsi le mani con sapone e acqua calda.
- Con un movimento circolare, pulire la sede di iniezione con un tampone imbevuto di alcool. Lasciare asciugare prima di effettuare l'iniezione.
- Non toccare di nuovo l'area pulita prima di effettuare l'iniezione.

## Iniezione

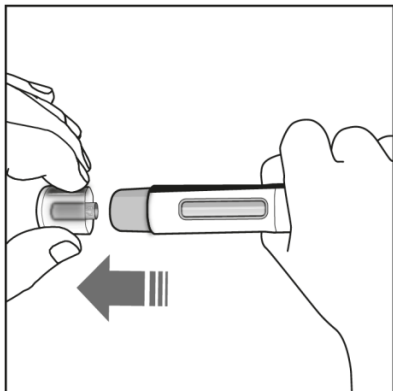

### 4. Rimozione del cappuccio

- Rimuovere il cappuccio solo quando si è pronti per l'uso della penna.
- Estrarre il cappuccio in direzione della freccia mostrata nella figura a sinistra.
- Una volta che è stato rimosso, gettare il cappuccio. Non tentare di rimettere il cappuccio.
- Usare la penna entro 5 minuti dalla rimozione del cappuccio.

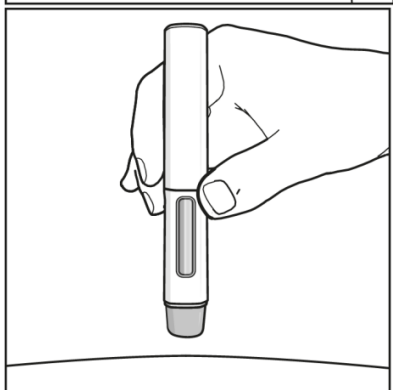


### 5. Posizione della penna

- Tenere la penna a 90 gradi rispetto alla sede di iniezione pulita.



Corretto

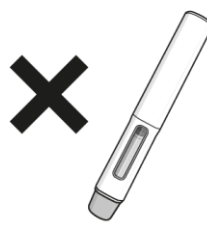

Non corretto




### DA LEGGERE PRIMA DI ESEGUIRE L'INIEZIONE.

Durante l'iniezione sentirà **2 click**.


Il **primo click** indica che l'iniezione è iniziata. Diversi secondi più tardi un **secondo click** indicherà che l'iniezione è **quasi** completata.

Deve continuare a tenere saldamente la penna contro la pelle fino a quando non vedrà un **indicatore verde con una punta grigia** riempire la finestra e interrompere il suo movimento.

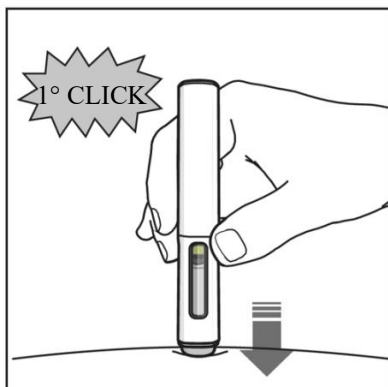

### 6. Iniziare l'iniezione


- Premere con fermezza la penna contro la pelle per iniziare l'iniezione.
- Il **primo click** indica che l'iniezione è iniziata.
- **Continuare a mantenere** la penna con fermezza contro la pelle.  
L'**indicatore verde con la punta grigia** mostra lo stato di avanzamento dell'iniezione.

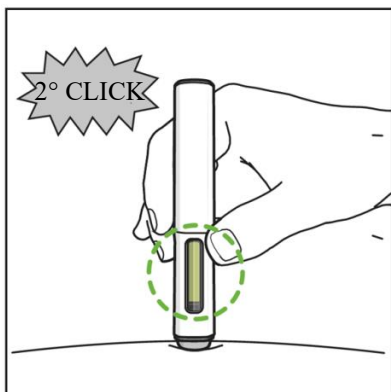

### 7. Completare l'iniezione


- Attendere il suono del **secondo click**. Questo indica che l'iniezione è **quasi** completata.
- Controllare che l'**indicatore verde con la punta grigia** riempi la finestra e si sia fermato.
- La penna può essere ora rimossa.

### Dopo l'iniezione

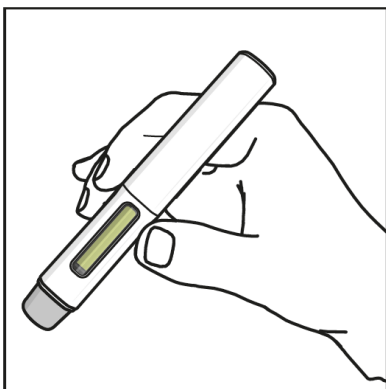

### 8. Controllare che l'indicatore verde riempi la finestra

- Questo significa che il medicinale è stato somministrato. Contattare il medico se l'indicatore verde non è visibile.
- Potrebbe verificarsi un leggero sanguinamento nella sede dell'iniezione. In tal caso si può premere un batuffolo di cotone o una garza sulla sede dell'iniezione e tenerlo per 10 secondi. Non strofinare la sede di iniezione. Se necessario è possibile coprire la sede dell'iniezione con un piccolo cerotto.

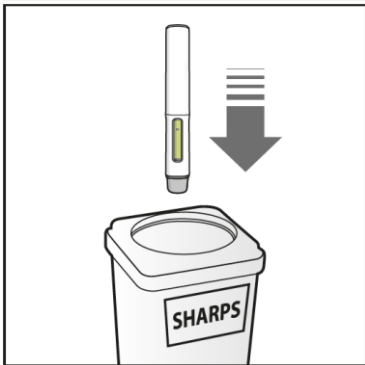

### 9. Smaltire la penna UnoReady di Cosentyx di 300 mg

- Smaltire la penna utilizzata riponendola in un apposito contenitore per materiale tagliente (es. un contenitore richiudibile, resistente alle forature o simili).
- Non tentare mai di riutilizzare la penna.