

Instruções para administração de Cosentyx 300 mg caneta UnoReady

secucinumab



Leia TODAS as instruções até ao fim antes de injetar.

Estas instruções são para ajudá-lo a injetar corretamente a caneta UnoReady de Cosentyx.

É importante que não tente injetar-se até que tenha sido treinado pelo seu médico, enfermeiro ou farmacêutico.

A caneta UnoReady de Cosentyx 300 mg:



Cosentyx 300 mg caneta UnoReady com a tampa retirada. **Não** remova a tampa até que esteja pronto para injetar.

Não utilize Cosentyx caneta UnoReady se o selo da cartanagem estiver quebrado.

Para proteger da luz, mantenha Cosentyx caneta UnoReady na cartanagem selada até que esteja pronto para utilizá-la.

Conserva Cosentyx caneta UnoReady num frigorífico entre 2°C e 8°C e **fora do alcance das crianças**.

- **Não congele** a caneta.
- **Não agite** a caneta.
- Não utilize a caneta se esta tiver **caído** sem a tampa.

A agulha está coberta pela proteção da agulha e a agulha não será vista. Não toque ou empurre a proteção da agulha, pois poderá ferir-se com a agulha.

O que é necessário para a injeção:

Incluído na embalagem:

Uma caneta UnoReady de Cosentyx 300 mg nova e não utilizada.



Não incluído na embalagem:


- Toallete com álcool.
- Bola de algodão ou gaze.
- Contentor para objetos cortantes.



Antes da injeção:

Retire Cosentyx 300 mg caneta UnoReady do frigorífico **30-45 minutos antes da injeção** para

permitir que atinja a temperatura ambiente

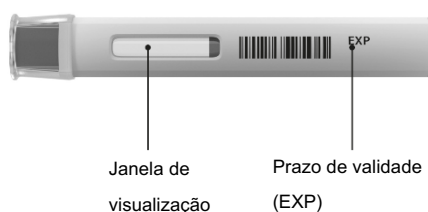

1. Verificações importantes de segurança antes de injetar:

Para a “Janela de visualização”:

O líquido deve ser límpido. A sua cor pode variar de incolor a ligeiramente amarela.



Não utilize se o líquido contém partículas facilmente visíveis, está turvo ou nitidamente castanho. Poderá observar uma pequena bolha de ar, o que é normal.

Para o “Prazo de validade”:

Olhe para o prazo de validade (EXP) na caneta UnoReady de Cosentyx. **Não utilize** a caneta se o **prazo de validade** expirou.

Verifique se a sua caneta contém o medicamento e a dose corretos.

Contacte o seu farmacêutico se a caneta falhar em alguma destas verificações.

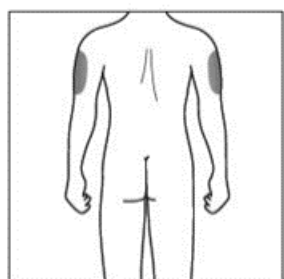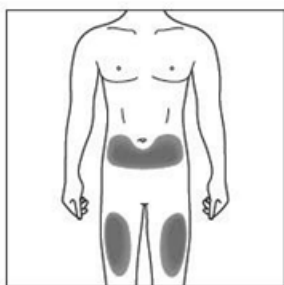

2a. Escolha o local da injeção:

- O local recomendado é a frente das coxas. Também poderá administrar na parte inferior do abdômen, mas **não** na área de 5 centímetros à volta do umbigo
- Escolha um local diferente para cada vez que administre uma injeção a si próprio
- Não injete em áreas onde a pele é suave, está ferida, vermelha, a descamar ou dura. Evite áreas com cicatrizes ou estrias.


2b. Apenas para cuidadores e Profissionais de Saúde:

- Se for um cuidador ou um profissional de saúde a administrar-lhe a injeção, pode ser também administrada na parte exterior dos braços.

3. Limpe o local da injeção:


- Lave as mãos com sabão e água quente.
- Usando um movimento circular, limpe o local da injeção com o toalhete embebido em álcool. Deixe secar antes de injetar.
- Não toque na área limpa antes da injeção.

Injeção:

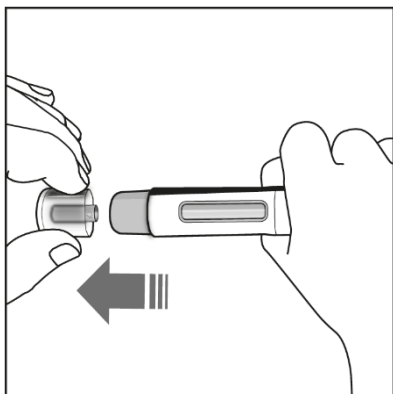

4. Retire a tampa:

- Retire a tampa apenas quando estiver pronto para administrar a caneta.
- Puxe a tampa diretamente na direção da seta que é mostrada na figura à esquerda.
- Uma vez retirada, deite fora a tampa. Não tente recolocar a tampa.
- Administre a caneta no período de 5 minutos após a remoção da tampa.

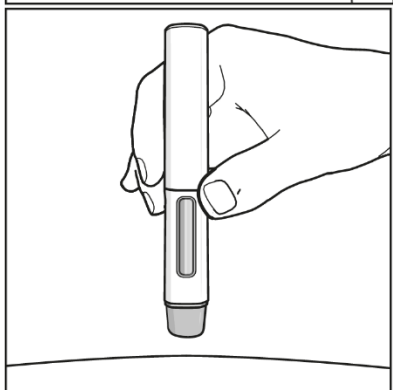


5. Segure a caneta:

- Segure a caneta a 90 graus em relação ao local de injeção limpo.



Correto

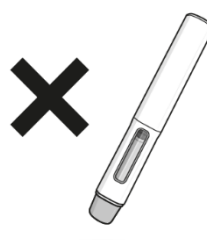

Incorreto




DEVE LER ISTO ANTES DA INJEÇÃO.

Durante a injeção irá ouvir **2 cliques**.


O **primeiro clique** indica que a injeção começou. Alguns segundos depois um **segundo clique** irá indicar que a injeção está **quase** a terminar.

Deve continuar a segurar a caneta com firmeza contra a sua pele até ver **um indicador verde com uma ponta cinzenta** preencher a janela e parar de se mover.

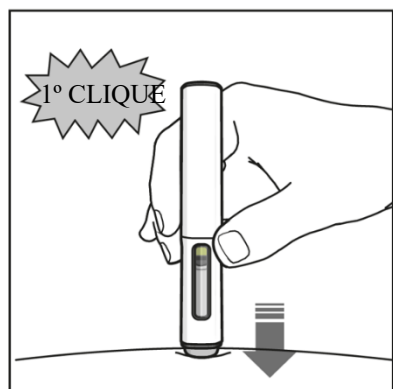

6. Iniciar a injeção:


- Pressione a caneta com firmeza contra a sua pele para iniciar a injeção.
- O **primeiro clique** indica que a injeção começou.
- **Continue a segurar** a caneta com firmeza contra a sua pele. O **indicador verde com uma ponta cinzenta** mostra o progresso da sua injeção.

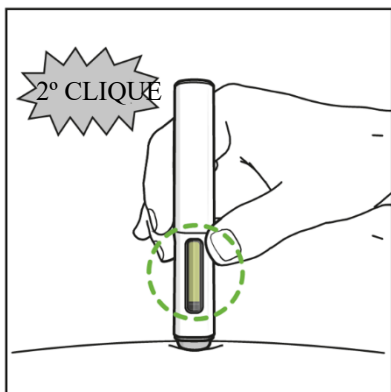

7. Finalizar a injeção:


- Escute o **Segundo clique**. Este indica que a injeção está **quase** a terminar.
- Verifique que o **indicador verde com uma ponta cinzenta** preenche a janela e que parou de se mover.
- A caneta pode agora ser retirada.

Após a injeção:

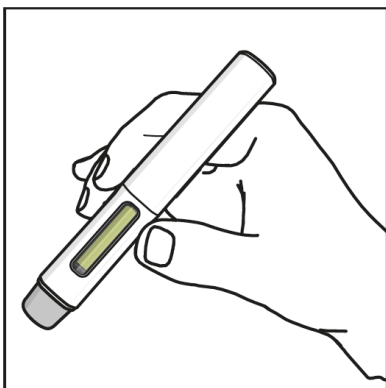

8. Verifique que o indicador verde preenche a janela:

- Isto indica que o medicamento foi administrado. Contacte o meu médico se o indicador verde não é visível.
- Pode haver uma pequena quantidade de sangue no local da injeção. Pode pressionar uma bola de algodão ou gaze no local da injeção e segurá-la durante 10 segundos. Não esfregue o local da injeção. Pode cobrir o local da injeção com um pequeno curativo adesivo, se necessário.

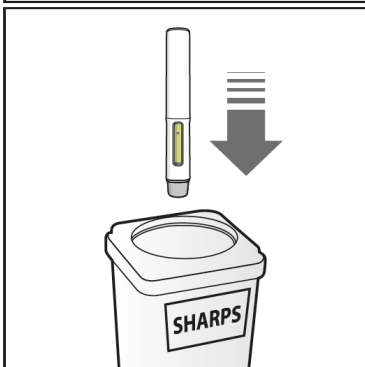

9. Eliminar a caneta UnoReady de Cosentyx 300 mg:

- Deite fora a caneta num contentor para objetos cortantes (isto é, num contentor fechado e resistente a perfurações, ou similar).
- Não tente reutilizar a caneta.