

Navodila za uporabo injekcijskega peresnika UnoReady s 300 mg zdravila Cosentyx

sekukinumab




Pred injiciranjem preberite ta navodila V CELOTI.

Ta navodila vam bodo pomagala, da boste pri injiciranju zdravila Cosentyx pravilno uporabljali injekcijski peresnik UnoReady.

Pomembno je, da si ne poskušate zdravila injicirati sami, dokler vas tega ne nauči zdravnik, medicinska sestra ali farmacevt.

Injekcijski peresnik UnoReady s 300 mg zdravila Cosentyx:

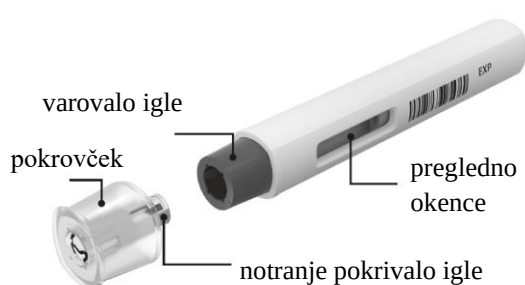

Ne uporabljajte peresnika Cosentyx UnoReady, če je pečat na škatli pretrgan.

Peresnik Cosentyx UnoReady shranjujte v zaprti škatli, dokler niste pripravljeni na uporabo, da ga zaščitite pred svetlobo.

Injekcijski peresnik Cosentyx UnoReady shranjujte v **hladilniku** pri temperaturi od 2 °C do 8 °C in **otrokom nedosegljivo**.

- Injekcijskega peresnika **ne zamrzujte**.
- **Ne stresajte** injekcijskega peresnika.
- Če vam je injekcijski peresnik **padel** s snetim pokrovčkom, ga ne uporabite.

Injekcijski peresnik UnoReady s 300 mg zdravila Cosentyx je zgoraj prikazan s snetim pokrovčkom. Pokrovček snemite šele **tik pred** injiciranjem.

Igla je pokrita z varovalom igle, zato ne bo vidna. Ne dotikajte se ali potikajte varovala igle, ker se lahko zbodete.

Kaj potrebujete pri injiciranju:

V škatli najdete:

nov in neuporabljen injekcijski peresnik UnoReady s 300 mg zdravila Cosentyx.




Pripomočki, ki niso priloženi:

- alkoholni zloženec
- kosem vate ali zloženec iz gaze
- zbiralnik za ostre predmete



Pred injiciranjem:

Peresnik Cosentyx UnoReady 300 mg vzemite iz hladilnika **30-45 minut pred injiciranjem**, da se lahko ogreje na sobno temperaturo

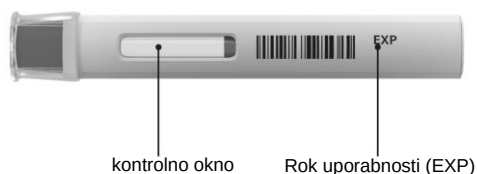

1. Kaj je treba preveriti pred injiciranjem:

Za »kontrolno okno«:

Tekočina mora biti bistra, njena barva pa lahko variira od brezbarvne do nekoliko rumenkaste.



Tekočine **ne uporabljajte**, če vsebuje jasno vidne delce, če je motna ali izrazito rjave barve. Morda lahko vidite majhen zračni mehurček, kar je normalno.

Za »Rok uporabnosti«:

Upoštevajte rok uporabnosti (EXP) na peresniku Cosentyx UnoReady. Injekcijskega peresnika **ne uporabljajte**, če mu je potekel **rok uporabnosti**.

Prepričajte se, da peresnik vsebuje ustrezno zdravilo in odmere.

Če pri opisanem pregledu ugotovite, da injekcijski peresnik ni ustrezen, se obrnite na farmacevta.

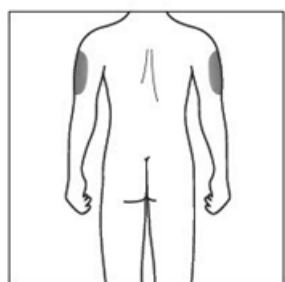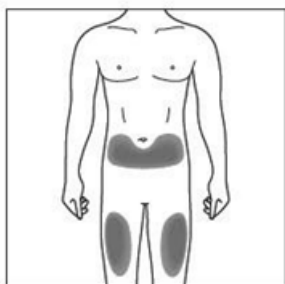

2a. Izberite mesto injiciranja:

- Priporočeno mesto injiciranja je na sprednjem delu stegen. Zdravilo lahko injicirate tudi na spodnjem delu trebuha, vendar **ne** v predelu, oddaljenem 5 centimetrov ali manj od popka.
- Vsakokrat, ko si injicirate zdravilo, izberite drugo mesto na koži.
- Zdravila ne injicirajte v predele, kjer je koža bolj občutljiva, podpluta, rdeča, luskasta ali trda. Prav tako se izogibajte predelom z brazgotinami ali strijami.


2b. Samo za negovalce in zdravstvene delavce:

- Če vam injekcijo daje **negovalec** ali **zdravstveni delavec**, lahko zdravilo injicira tudi na zunanji strani nadlakti.

3. Čiščenje mesta injiciranja:


- Roke si umijte z milom in vročo vodo.
- Uporabite alkoholni zloženec in s krožnimi gibi očistite mesto injiciranja. Pred injiciranjem naj se koža posuši.
- Pred injiciranjem se očiščenega mesta ne dotikajte več.

Injiciranje:

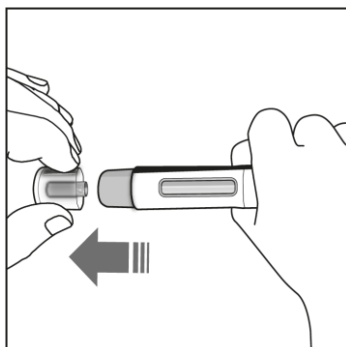

4. Snemanje pokrovčka:

- Pokrovček snemite šele takrat, ko boste pripravljeni za uporabo injekcijskega peresnika.
- Pokrovček povlecite naravnost stran v smeri puščice, prikazane na levi sliki.
- Ko pokrovček odstranite, ga zavržite. Ne poskušajte ga namestiti nazaj na injekcijski peresnik.
- Po odstranitvi pokrovčka morate injekcijski peresnik uporabiti v roku 5 minut.

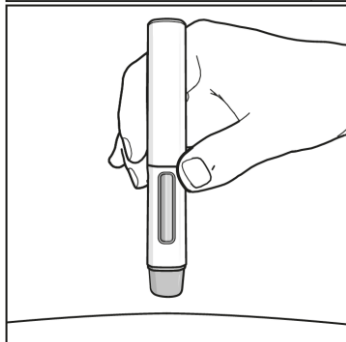

5. Kako držati injekcijski peresnik:

- Injekcijski peresnik držite pravokotno nad očiščenim mestom injiciranja (pod kotom 90 stopinj).



pravilno



nepravilno




TO MORATE PREBRATI PRED INJICIRANJEM

Med injiciranjem boste slišali **2 klika**.


1. klik pomeni, da se je injiciranje začelo. Nekaj sekund kasneje boste slišali **2. klik**, ki pomeni, da je injiciranje **skoraj** končano.

Injekcijski peresnik še naprej močno pritiskajte v kožo, dokler **zeleni indikator s sivo konico** povsem ne zapolni okenca in se neha premikati.

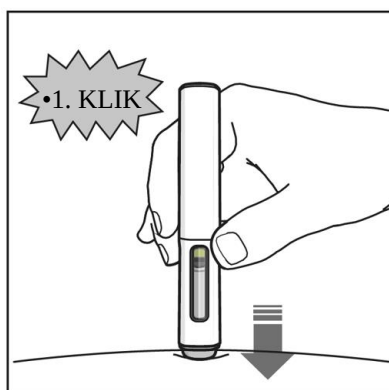

6. Začetek injiciranja:


- Injekcijski peresnik močno pritisnite proti koži, da se injiciranje lahko začne.
- **1. klik** pomeni, da se je injiciranje začelo.
- Injekcijski peresnik **še naprej močno pritiskajte** v kožo.
- **Zeleni indikator s sivo konico** kaže potek injiciranja.

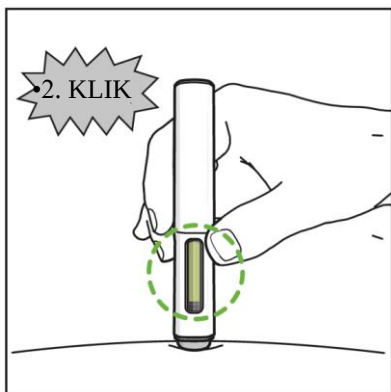

7. Zaključek injiciranja:


- Počakajte na **2. klik**. Ta pomeni, da je injiciranje **skoraj** končano.
- Opazujte, kdaj **zeleni indikator s sivo konico** zapolni okence in se neha premikati.
- Zdaj lahko injekcijski peresnik odstranite s kože.

Po injiciranju:

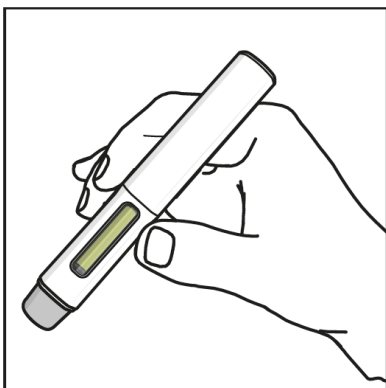

8. Preglejte, ali je zeleni indikator zapolnil okence:

- To pomeni, da je odmerek zdravila injiciran v celoti. Če zelenega indikatorja ni videti, obvestite zdravnika.
- Na mestu injiciranja se lahko pojavi nekaj krvi. Na to mesto lahko pritisnete kosem vate ali zloženec iz gaze in ga držite 10 sekund. Mesta injiciranja ne drgnite. Če je treba, ga lahko pokrijete z majhnim obližem.

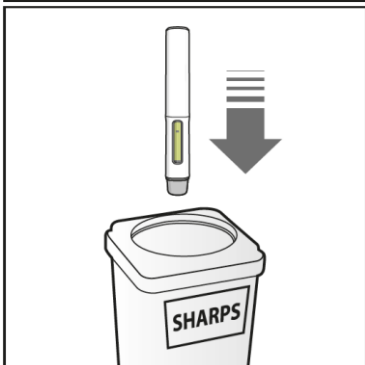

9. Odstranjevanje injekcijskega peresnika UnoReady s 300 mg zdravila Cosentyx:

- Uporabljen injekcijski peresnik odvrzite v zbiralnik za ostre predmete (torej v vsebnik iz materiala, ki ga ni mogoče prebosti, vsebnik pa je mogoče zapreti, ali v podoben vsebnik).
- Že uporabljenega injekcijskega peresnika nikoli ne poskušajte ponovno uporabiti.