

## Instrucciones de uso de Cosentyx 300 mg en pluma UnoReady secukinumab




**Lea TODAS las instrucciones antes de inyectarse el medicamento.**

Estas instrucciones le van a ayudar a ponerse correctamente Cosentyx en pluma UnoReady.

Es importante que usted no intente inyectarse el medicamento hasta que el médico, la enfermera o el farmacéutico le hayan enseñado cómo hacerlo.

### Su Cosentyx 300 mg en pluma UnoReady:

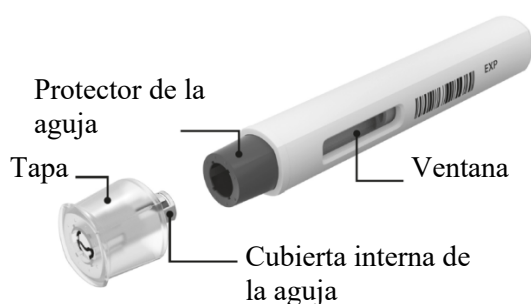

Arriba se muestra Cosentyx 300 mg en pluma UnoReady sin tapa. **No** quite la tapa hasta que esté listo para ponerse la inyección.

**No utilizar** la pluma UnoReady de Cosentyx si el precinto de la caja exterior está roto.

Conserve la pluma UnoReady de Cosentyx en la caja exterior precintada hasta que esté preparado para utilizarla para protegerla de la luz.

Conserve Cosentyx en pluma UnoReady en la **nevera** entre 2°C y 8°C y **fuera del alcance de los niños**.


- **No congelar** la pluma.
- **No agitar** la pluma.
- No utilizar la pluma si se **cae** sin la tapa.

La aguja está cubierta por el protector de la aguja y no se ve. No toque ni empuje el protector de la aguja porque podría sufrir una lesión por un pinchazo de la aguja.

### Qué necesita para la inyección:

Incluido en la caja:

Una pluma UnoReady de Cosentyx 300 mg nueva y sin usar.

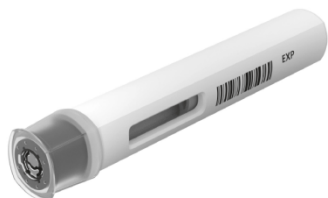

No incluido en la caja:


- Toallita humedecida en alcohol.
- Algodón y gasa.
- Cubo de eliminación de objetos punzantes.



### Antes de la inyección:

Saque Cosentyx 300 mg en pluma UnoReady de la nevera **30 a 45 minutos antes de la inyección** para

que se atempere.

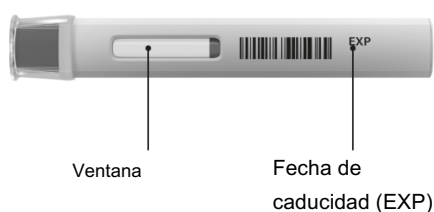

### 1. Antes de inyectarse compruebe los aspectos importantes de seguridad:

Por la “Ventana”:

El líquido debe ser transparente. Su color puede variar de incoloro a ligeramente amarillento.



**No utilizar** si el líquido contiene partículas, está turbio o tiene un color claramente marrón. Puede ver pequeñas burbujas de aire, que es normal.

Por la “Fecha de caducidad”:

Mire la fecha de caducidad (EXP) en su Cosentyx en pluma UnoReady. **No utilice** la pluma si ha pasado la **fecha de caducidad**.

Compruebe que su pluma contiene el medicamento y la dosis correctos.

Contacte con su farmacéutico si la pluma no cumple con alguno de estos requisitos.

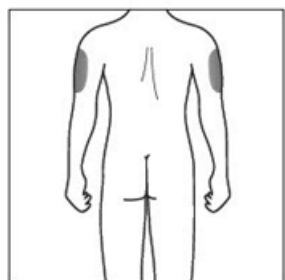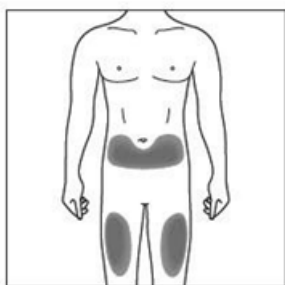

### 2a. Elija un lugar de inyección:

- Se recomienda utilizar la parte superior de los muslos. También puede utilizar la parte inferior de abdomen, pero **no** en un área de 5 cm alrededor del ombligo.
- Elija cada vez un nuevo lugar para la inyección.
- No inyecte en ninguna zona donde la piel esté sensible, dañada, enrojecida, descamada o dura. Evite las zonas con cicatrices o estrías.


### 2b. Solo cuidadores o profesionales sanitarios:

- Si quien pone la inyección es **la persona que cuida al paciente o profesional sanitario**, entonces también se puede utilizar la parte superior de los brazos.

### 3. Desinfecte el lugar de inyección:


- Lávese antes las manos con agua caliente y jabón.
- Desinfecte el lugar de inyección con una toallita humedecida con alcohol, haciendo un movimiento circular. Déjelo secar antes de ponerse la inyección.
- No vuelva a tocar la zona limpia antes de la inyección.

## La inyección:

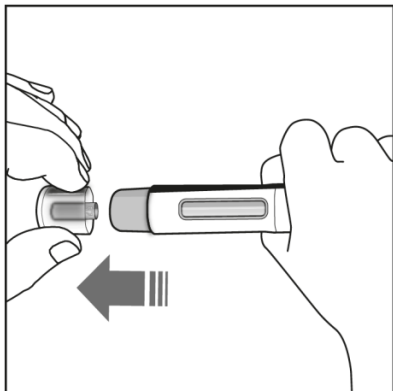



### 4. Quite la tapa:

- Quite la tapa solo cuando esté listo para utilizar la pluma.
- Retire la tapa en línea recta en la dirección de la flecha tal y como se muestra en la figura de la izquierda.
- Una vez retirada, deséchela. No intente volver a colocar la tapa.
- Utilice la pluma en los 5 minutos posteriores a haberle quitado la tapa.

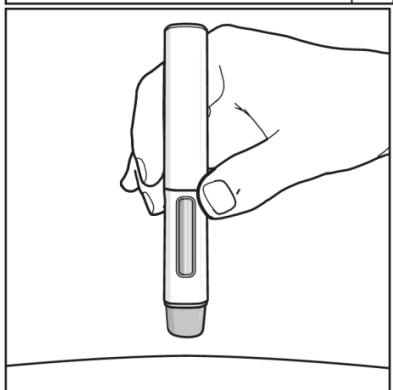

### 5. Sujete su pluma:

- Sujete la pluma a 90° del lugar de inyección desinfectado.

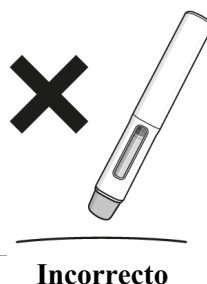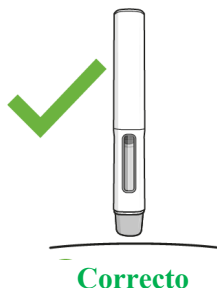


## DEBE LEER LO SIGUIENTE ANTES DE LA INYECCIÓN.

Durante la inyección, usted oirá **2 clics**.


El **1<sup>er</sup> clic** indica el inicio de la inyección. Después de unos segundos, el **2<sup>o</sup> clic** indicará que la inyección está **a punto** de finalizar.

Mantenga la pluma firmemente presionada contra la piel hasta que el **indicador verde con una punta gris** llene la ventana y haya dejado de moverse.

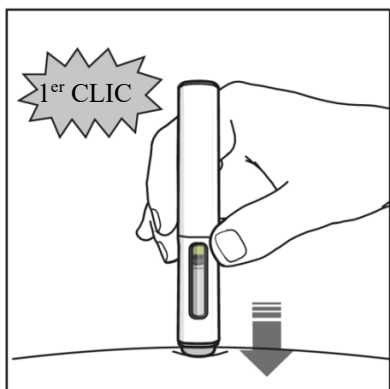

### 6. Inicio de la inyección:


- Presione con firmeza la pluma contra la piel para iniciar la inyección.
- El **1<sup>er</sup> clic** indica el inicio de la inyección.
- **Mantenga** la pluma firmemente **presionada** contra la piel. El **indicador verde con la punta gris** le indicará el progreso de la inyección.

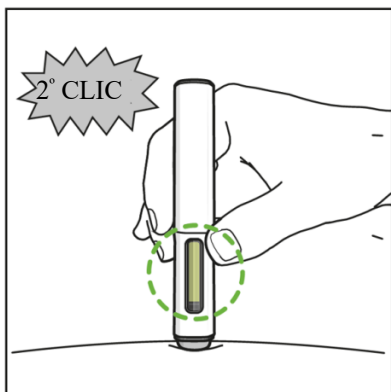

### 7. Final de la inyección:


- Escucha el **2° clic**. Esto indica que la inyección está a **punto** de finalizar.
- Verifique que el **indicador verde con la punta gris** llene la ventana y haya dejado de moverse.
- Ahora puede retirar la pluma.

### Después de la inyección:

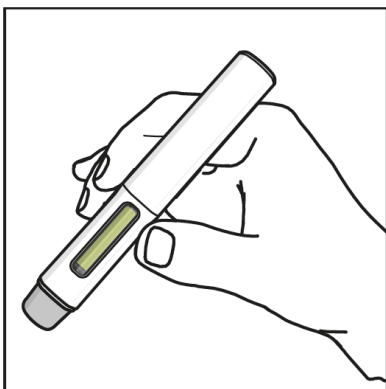

### 8. Verifique que el indicador verde llene la ventana:

- Esto significa que el medicamento ha sido administrado. En el caso que no se viera el indicador verde, póngase en contacto con su médico.
- Puede haber una pequeña cantidad de sangre en el lugar de la inyección. Puede presionar durante 10 segundos con un algodón o una gasa la zona de inyección. No se frote el lugar de inyección. Se puede poner una tirita si lo necesita.

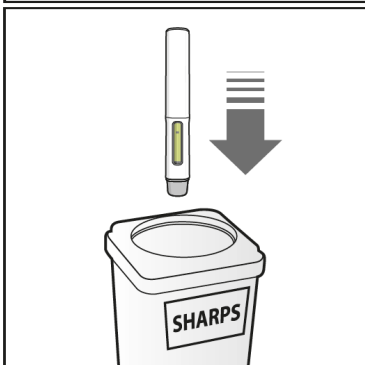

### 9. Eliminación de Cosentyx 300 mg en pluma UnoReady:

- Deseche la pluma usada en un cubo de eliminación de objetos punzantes (recipiente cerrado y resistente a pinchazos o similar).
- Nunca trate de reutilizar la pluma.