

Upute za uporabu Cosentyx 300 mg UnoReady brizgalice sekukinumab




Pročitajte ove upute DO KRAJA prije nego što primijenite injekciju.

Svrha ovih uputa je da Vam pomognu pravilno ubrizgati lijek korištenjem Cosentyx UnoReady brizgalice.

Važno je da ne pokušavate dati injekciju sami sebi dok Vas nisu tome poučili Vaš liječnik, medicinska sestra ili ljekarnik.

Vaša Cosentyx 300 mg UnoReady brizgalica:

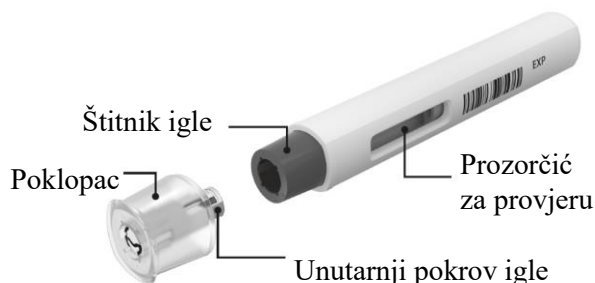

Cosentyx 300 mg UnoReady brizgalica je prikazana iznad s uklonjenim poklopcem. **Nemojte** uklanjati poklopac dok niste spremni ubrizgati lijek.

Ne koristite Cosentyx UnoReady brizgalicu ako je kutija odlijepljena.

Kako biste Cosentyx UnoReady brizgalicu zaštitili od svjetla, čuvajte ju u neodlijepljenoj kartonskoj kutiji dok ju niste spremni upotrijebiti.

Čuvajte svoju Cosentyx UnoReady brizgalicu u **hladnjaku** na temperaturi između 2 °C i 8 °C te **izvan** dohvata djece.

- **Ne zamrzavajte** brizgalicu.
- **Ne tresite** brizgalicu.
- Ne koristite brizgalicu ako Vam je **pala** nakon što je poklopac uklonjen.

Iglu prekriva štitnik igle te se ona ne vidi. Ne dirajte, niti ne stišćite štitnik igle, jer se možete ozlijediti od uboda igle.

Što Vam treba za injekciju:

Uključeno u kutiju:

Nova i neupotrijebljena Cosentyx 300 mg UnoReady brizgalica.




Nije uključeno u kutiju:

- Alkoholni tupfer.
- Pamučna vata ili gaza.
- Spremnik za odlaganje oštih predmeta.



Prije primjene injekcije:

Izvadite Cosentyx 300 mg UnoReady brizgalicu iz hladnjaka **30 do 45 minuta prije ubrizgavanja** kako bi mogla doseći sobnu temperaturu.

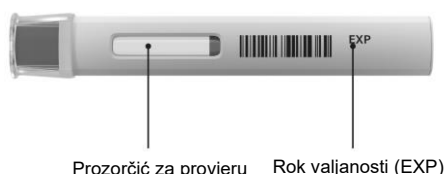

1. Važne sigurnosne provjere prije nego što si date injekciju:

Za „Prozorčić za provjeru“:

Tekućina treba biti bistra. Boja joj može varirati od bezbojne do žućkaste.



Ne upotrebljavajte ako tekućina sadrži lako vidljive čestice, ako je zamućena ili izrazito smeđa. Možda ćete vidjeti mjehurić zraka, što je normalno.

Za „Rok valjanosti“:

Provjerite rok valjanosti (EXP) Vaše Cosentyx UnoReady brizgalice. **Ne upotrebljavajte** brizgalicu ako je istekao **rok valjanosti**.

Provjerite da Vaša brizgalica sadrži pravi lijek i dozu.

Obratite se svom ljekarniku ako brizgalica ne prođe bilo koju od ovih provjera.

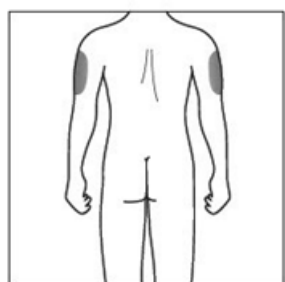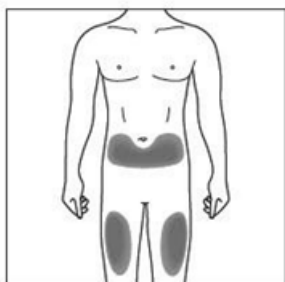

2a. Odaberite mjesto primjene injekcije:

- Preporučeno mjesto je prednja strana bedara. Možete iskoristiti i donji dio trbuha, ali **ne** područje 5 centimetara oko pupka.
- Odaberite drugo mjesto svaki put kada si dajete injekciju.
- Nemojte ubrizgavati lijek u područja na kojima je koža osjetljiva, s modricama, crvena, ljuskasta ili tvrda. Izbjegavajte područja s ožiljcima ili strijama.


2b. Samo za njegovatelje i zdravstvene radnike:

- Ako Vam **njegovatelj** ili **zdravstveni radnik** daju injekciju, mogu Vam je dati i u vanjski dio nadlaktice.

3. Čišćenje mjesta primjene injekcije:


- Operite ruke sapunom i vrućom vodom.
- Kružnim pokretima očistite mjesto primjene alkoholnim tupferom. Pustite da se osuši prije primjene injekcije.
- Ne dirajte ponovno očišćeno područje prije primjene injekcije.

Vaša injekcija:

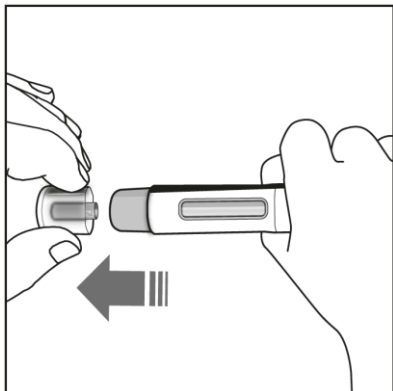

4. Skidanje poklopca:

- Skinite poklopac tek kad ste spremni upotrijebiti brizgalicu.
- Skinite poklopac ravnim potezom u smjeru strelice kako je prikazano na lijevoj slici.
- Nakon što ga skinete, odložite poklopac. Ne pokušavajte ponovno staviti poklopac.
- Upotrijebite brizgalicu u roku od 5 minuta nakon što skinete poklopac.

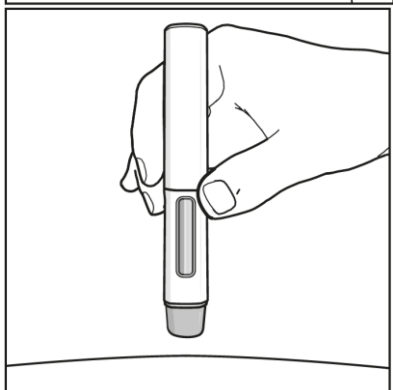


5. Držanje brizgalice:

- Držite brizgalicu pod kutem od 90 stupnjeva u odnosu na očišćeno mjesto primjene.



Pravilno

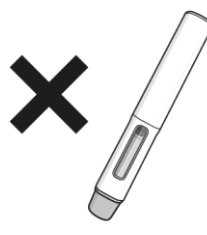

Nepravilno




MORATE OVO PROČITATI PRIJE PRIMJENE INJEKCIJE.

Tijekom injekcije čut ćete **2 klika**.


Prvi klik označava da je injekcija započela. Nekoliko sekundi kasnije **drugi klik** označit će da je injekcija **skoro** gotova.

Morate i dalje držati brizgalicu čvrsto uz kožu dok ne vidite da je **zeleni indikator sa sivim vrhom** ispunio prozorčić i prestao se micati.

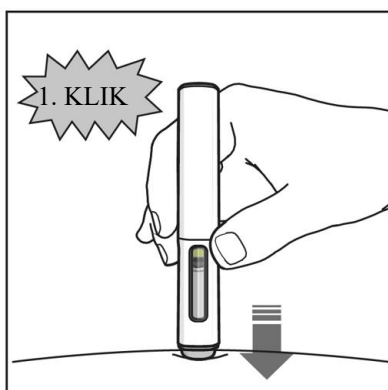

6. Početak injekcije:


- Pritisnite brizgalicu čvrsto na kožu da biste započeli injekciju.
- **Prvi klik** označava da je injekcija započela.
- **Nastavite držati** brizgalicu čvrsto uz kožu. **Zeleni indikator sa sivim vrhom** pokazuje napredovanje injekcije.

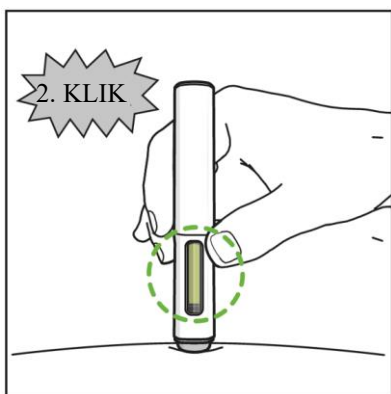

7. Završetak injekcije:


- Pričekajte da čujete **drugi klik**. On označava da je injekcija **skoro** gotova.
- Provjerite je li **zeleni indikator sa sivim vrhom** ispunio prozorčić i prestao se micati.
- Brizgalica se sada može maknuti.

Nakon injekcije:

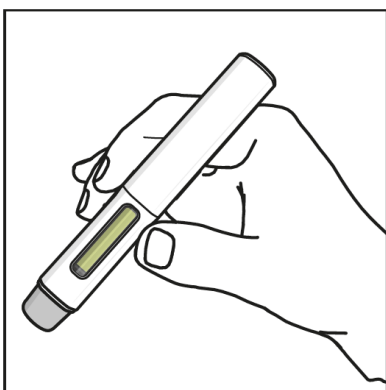

8. Provjerite je li zeleni indikator ispunio prozorčić:

- To znači da je lijek ubrizgan. Obratite se svom liječniku ako zeleni indikator nije vidljiv.
- Na mjestu primjene moglo bi biti malo krvi. Možete pritisnuti pamučnu vatu ili gazu na mjesto primjene i držati je 10 sekundi. Ne trljajte mjesto primjene. Možete pokriti mjesto primjene malim flasterom ako je potrebno.

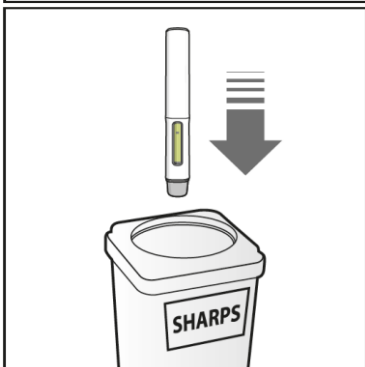

9. Odlaganje Cosentyx 300 mg UnoReady brizgalice:

- Odložite upotrijebljenu brizgalicu u spremnik za odlaganje oštih predmeta (tj. spremnik koji se može zatvoriti i otporan je na bušenje, ili nešto slično).
- Nikada nemojte pokušavati ponovno upotrijebiti svoju brizgalicu.