

Cosentyx[®] 300 mg UnoReady[®] pen-süstli kasutusjuhend

sekukinumab




Enne süstimist lugege läbi KOGU kasutusjuhend.

Need juhendid on mõeldud abistamiseks teid õigesti süstima kasutades Cosentyx UnoReady pen-süstlit.

On oluline, et te ei prooviks ennast süstida enne, kui teid on õpetanud arst, meditsiiniõde või apteeker.

Teie Cosentyx 300 mg UnoReady pen-süstel:

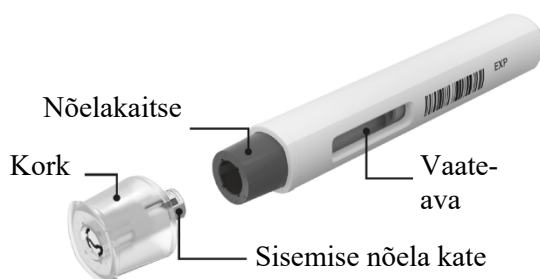

Ülal on näha Cosentyx 300 mg UnoReady pen-süstel eemaldatud korgiga. Korki **mitte** eemaldada enne, kui olete valmis süstima.

Cosentyx UnoReady pen-süstlit **mitte kasutada**, kui välispakendi sulgur on katki.

Cosentyx UnoReady pen-süstel hoida suletuna, kuni olete valmis süstima, et kaitsta seda valguse eest.

Cosentyx UnoReady pen-süstel hoida **külmkapis** temperatuurivahemikus 2 °C ja 8 °C ning **lastele kättesaamatus kohas**.

- Pen-süstlit **mitte lasta külmuda**.
- Pen-süstlit **mitte loksutada**.
- Pen-süstlit mitte kasutada, kui see **kukkus** maha ilma korgita.

Nõela katab nõelakaitse ja nõela ei ole näha. Nõelakaitset mitte katsuda ega sellele vajutada, sest võite saada nõelatorke.

Mida on süstimiseks vaja:

Karbis on:

Uus ja kasutamata Cosentyx 300 mg UnoReady pen-süstel.



Karbis ei ole:


- Alkoholitampoon.
- Vatitampoon või side.
- Teravate esemete konteiner.



Enne süstimist:

Mugavamaks süstimiseks võtke Cosentyx 300 mg UnoReady pen-süstel külmkapist välja

30...45 minutit enne süstimist, et lasta sel soojeneda toatemperatuurini.

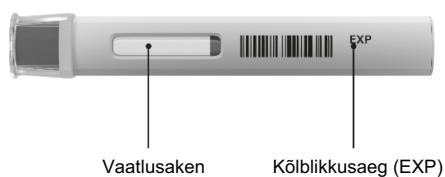

1. Oluline ohutuse kontroll enne süstimist:

„Vaatlusaken“:

Vedelik peab olema selge. Värvus võib varieeruda värvitust kergelt kollakani.



Ärge kasutage, kui vedelik sisaldab silmaga nähtavaid osakesi, on hägune või tajutavalt pruunikas. Võite näha väikest õhumulli, mis on normaalne.

“Kõlblikkusaeg”:

Vaadake kõlblikkusaega (EXP) oma Cosentyx UnoReady pen-süstlilt. **Ärge kasutage** pen-süstlit pärast **kõlblikkusaja** möödumist.

Kontrollige, et pen-süstel sisaldaks õiget ravimit ja annust.

Võtke ühendust oma apteekriga, kui pen-süstel ei vasta mis tahes loetletud punktidele.

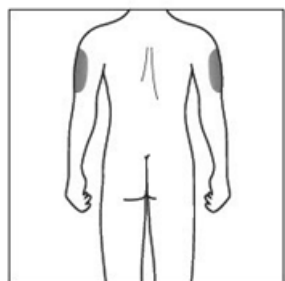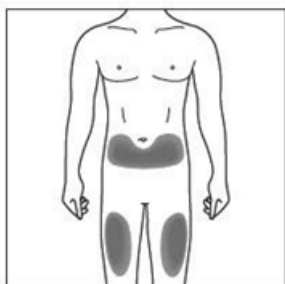

2a. Valige süstekoht:

- Soovitatav süstekoht on reie esiküljel. Võite kasutada ka alakõhtu, kuid **mitte** alal, mis on lähemal kui 5 sentimeetrit nabast.
- Süste tegemiseks valige iga kord erinev koht.
- Ärge süstige piirkonda, mille nahk on tundlik, esineb verevalum, punetus, ketendus või on kõva. Vältige armide või venitusarmidega piirkondi.

2b. Ainult hooldajatele ja tervishoiutöötajatele:


- Kui teile teeb süste **hooldaja** või **tervishoiutöötaja**, võib kasutada ka õlavarre ülemist osa.



3. Süstekoha puhastamine:


- Peske käsi seebi ja veega.
- Ringjate liigutustega puhastage süstekoht alkoholitampooniga. Enne süstimist laske süstekohal kuivada.
- Enne süstimist ärge puudutage puhastatud piirkonda.

Süstimine:

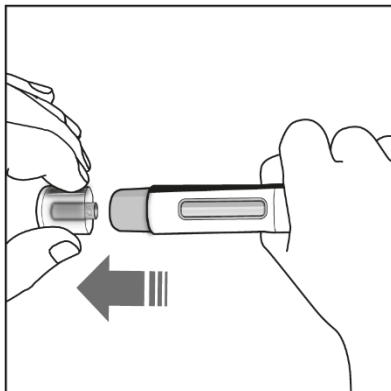


4. Korgi eemaldamine:

- Eemaldage kork ainult siis, kui te olete kohe valmis kasutama pen-süstlit.
- Tõmmake kork ära otse noolega näidatud suunas, mida on näha vasakpoolisel joonisel.
- Pärast eemaldamist, visake kork ära. Ärge proovige korki uuesti tagasi panna.
- Pärast korgi eemaldamist, kasutage pen-süstlit 5 minuti jooksul.

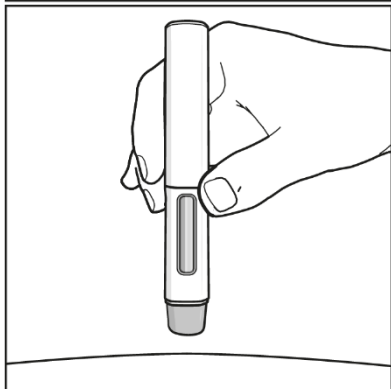

5. Pen-süstli hoidmine:

- Hoidke pen-süstlit süstekohas 90-kraadise nurga all.

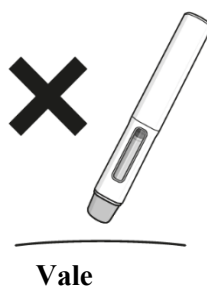


SEDA PEATE LUGEMA ENNE SÜSTIMIST .

Süstimise ajal kuulete **2 plõksatust**.


1. plõksatus näitab, et süstimine on alanud. Mitme sekundi pärast näitab **2. plõksatus**, et süstimine on **peaaegu** lõppenud.

Pen-süstlit peate hoidma tugevalt naha vastas, kuni **halli otsaga roheline märk** täidab vaateava ning enam ei liigu.

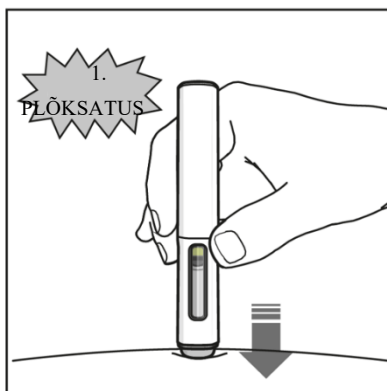

6. Süstimise alustamine:


- Suruge pen-süstel tugevalt vastu nahka, et alustada süstimist.
- **1. plõksatus** näitab, et süstimine on alanud.
- Hoidke pen-süstlit tugevalt vastu nahka.
- **Halli otsaga roheline märk** näitab süstimise kulgu.

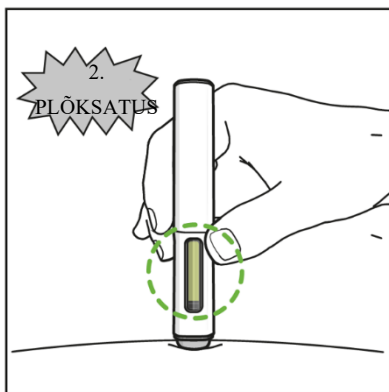

7. Süstimise lõpp:


- Kuuldes **2. plöksatust**, näitab see, et süstimine on **peaaegu** lõppenud.
- Kontrollige, kas **halli otsaga roheline märk** täidab vaateava ning enam ei liigu.
- Pen-süstli võib nüüd eemaldada.

Pärast süstimist:

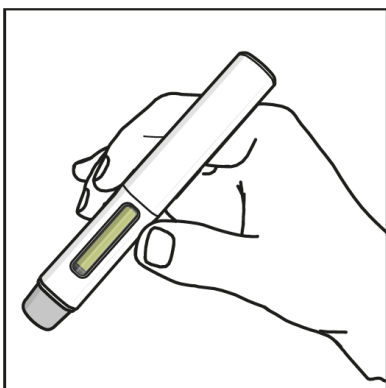

8. Kontrollige, kas roheline märk täidab vaateava:

- See tähendab, et ravim on manustatud. Pöörduge arsti poole, kui rohelist märki ei ole näha.
- Süstekohal võib olla väikene kogus verd. Võite suruda süstekohale vatitampooni või sideme ning hoida seda 10 sekundit. Ärge hõõruge süstekohta. Kui vaja, võite süstekoha katta väikese plaastriga.

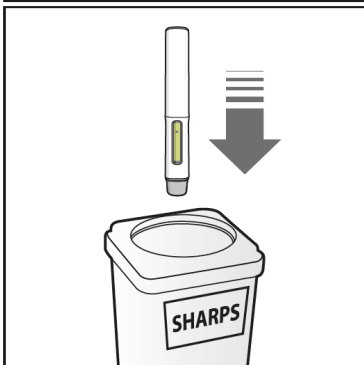

9. Cosentyx 300 mg UnoReady pen-süstli ära viskamine:

- Visake kasutatud pen-süstel teravate esemete konteinerisse (s.o suletav torkekindel konteiner või selle sarnane).
- Ärge kunagi proovige uuesti kasutada pen-süstlit.