

Norādījumi par Cosentyx® 300 mg UnoReady® pildspalvveida pilnšļirces lietošanu secukinumabum



Pirms injekcijas izlasiet VISUS turpmākos norādījumus.

Šie norādījumi Jums palīdzēs pareizi lietot Cosentyx UnoReady pildspalvveida pilnšļirci.

Ir svarīgi nemēģināt injicēt pašam, pirms Jūs nav apmācījis ārsts, medmāsa vai farmaceits.

Jūsu Cosentyx 300 mg UnoReady pildspalvveida pilnšļirce



Cosentyx 300 mg UnoReady pildspalvveida pilnšļirce attēlota ar noņemtu vāciņu.

Nenoņemiet vāciņu, pirms neesat sagatavojies injekcijai.

Nelietojiet Cosentyx UnoReady pildspalvveida pilnšļirci, ja uz ārējā kartona iepakojuma redzamas atvēršanas pazīmes.

Uzglabājiet Cosentyx UnoReady pildspalvveida pilnšļirci aizvērtā ārējā iepakojumā līdz brīdim, kad esat gatavs to lietot, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabājiet savu Cosentyx UnoReady pildspalvveida pilnšļirci **ledusskapī** (2°C–8°C temperatūrā) **bērniem nepieejamā vietā**.


- Pildspalvveida pilnšļirci **nedrīkst sasaldēt**.
- Pildspalvveida pilnšļirci **nedrīkst kratīt**.
- Nelietot pildspalvveida pilnšļirci, ja tā **nokritusi** ar noņemtu vāciņu.

Adatu sedz adatas aizsargs, un adata nebūs redzama. Neaiztieciot un nespiediet adatas aizsargu, jo jūs varat savainoties ar adatu.

Injicēšanas laikā nepieciešamais

Iekļauts iepakojumā:

Jauna nelietota Cosentyx 300 mg UnoReady pildspalvveida pilnšļirce.

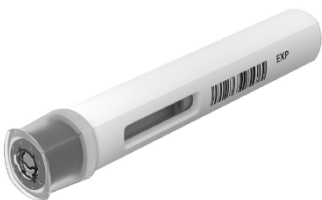


Nav iekļauts iepakojumā:

- spirta tampons;
- vates tampons vai marle un
- trauks asu priekšmetu izmešanai.



Pirms injekcijas

Izņemiet Cosentyx 300 mg UnoReady pildspalvveida pilnšļirces kastīti no ledusskapja **30 līdz 45 minūtes pirms injekcijas**, lai ļautu sasilt līdz istabas temperatūrai.

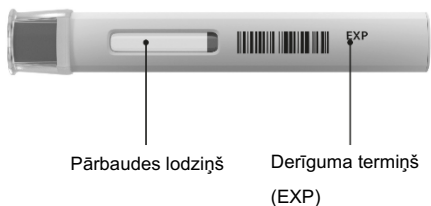

1. Svarīgas drošības pārbaudes pirms injekcijas

“Pārbaudes lodziņam”:

Šķidrumam jābūt caurspīdīgam. Tas var būt bezkrāsains vai viegli iedzeltens.



Nelietojiet šķidrumu, ja tajā ir labi saredzamas daļiņas vai tas ir duļķains vai izteikti brūns. Jūs varat saskatīt sīkus gaisa burbulīšus, un tas ir normāli.

“Derīguma termiņam”:

Apskatiet derīguma termiņu (EXP) uz Jūsu Cosentyx UnoReady pildspalvveida pilnšļirces. **Nelietojiet** pildspalvveida pilnšļirci, ja beidzies tās **derīguma termiņš**.

Pārbaudiet, vai Jūsu pildspalvveida pilnšļirce satur atbilstošas zāles un devu.

Ja pildspalvveida pilnšļirce neiztur kādu no šīm pārbaudēm, sazinieties ar savu farmaceitu.

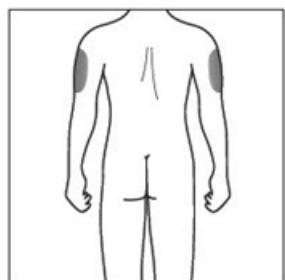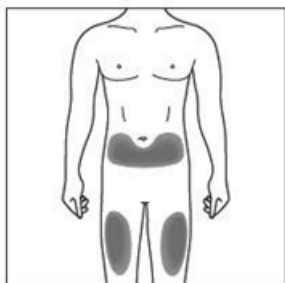

2a. Izvēlieties injekcijas vietu

- Ieteicamā vieta ir augšstilbu priekšējā daļa. Jūs varat injicēt arī vēdera lejasdaļā, bet **ne** piecu centimetru rādiusā ap nabu.
- Katrai injekcijai vienmēr jāizvēlas cita vieta.
- Nedrīkst injicēt zonā, kur āda ir jutīga, ar zilumiem, apsarkusi, zvīnaina vai sacietējusi. Jāizvairās injicēt zonās ar rētām vai strijām.



2b. Tikai aprūpētājiem un veselības aprūpes speciālistiem

- Ja injekciju izdara **aprūpētājs** vai **veselības aprūpes speciālists**, injicēt drīkst arī augšdelma ārējā daļā.

3. Injekcijas vietas tīrīšana

- Ar ziepēm un ūdeni nomazgājiet rokas.
- Izmantojot spirta tamponu, ar riņķveida kustībām notīriet injekcijas vietu. Pirms injekcijas ļaujiet tai nožūt.
- Pirms injekcijas nepieskarieties notīrītajai vietai.

Injekcija

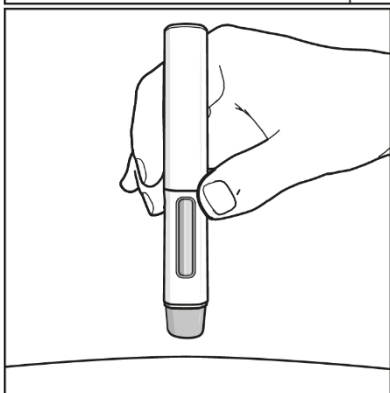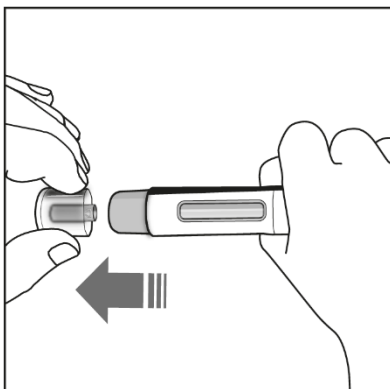


4. Vāciņa noņemšana

- Noņemiet vāciņu tikai tad, kad esat sagatavojies pildspalvveida pilnšļirces lietošanai.
- Noņemiet vāciņu tieši bultiņas virzienā, kas parādīts attēlā kreisajā pusē.
- Vāciņš pēc noņemšanas jāizmet. Nemēģiniet likt vāciņu atpakaļ.
- Pildspalvveida pilnšļirce jāizlieto piecu minūšu laikā pēc vāciņa noņemšanas.


5. Kā turēt pildspalvveida pilnšļirci

- Pildspalvveida pilnšļirce jātur 90 grādu leņķī pret injekcijas

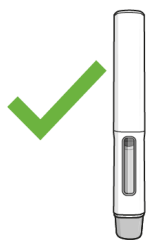

vietu.

Pareizi

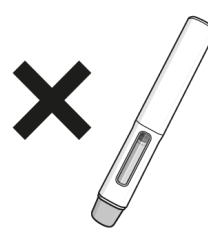

Nepareizi




IZLASĪT PIRMS INJICĒŠANAS.

Injekcijas laikā būs dzirdami **divi klikšķi**.


Pirmais klikšķis norāda, ka injekcija ir sākusies. Pēc vairākām sekundēm dzirdamais **otrais klikšķis** norādīs, ka injekcija ir **gandrīz** beigusies.

Pildspalvveida pilnšļirci jāturpina stingri turēt, līdz **zaļais indikators** ir aizpildījis lodziņu un apstājies.


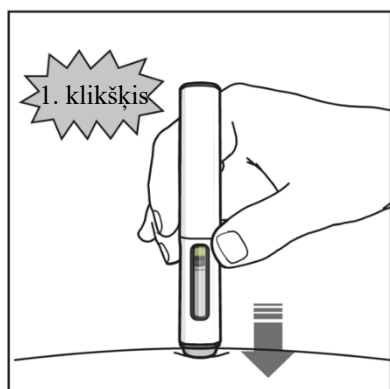


6. Injekcijas sākšana

- Stingri piespiediet pildspalvveida pilnšļirci pie ādas, lai sāktu injekciju.
- **Pirmais klikšķis** norāda, ka injekcija ir sākusies.
- **Turpiniet turēt** pildspalvveida pilnšļirci stingri pret ādu.
- **Zaļais indikators ar pelēku uzgali** parāda injekcijas gaitu.

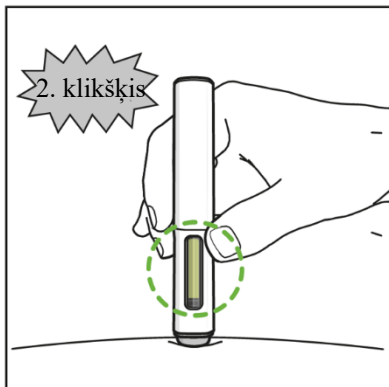

Pēc injekcijas

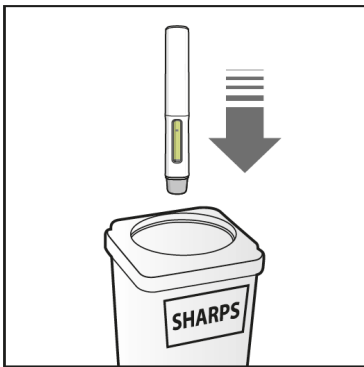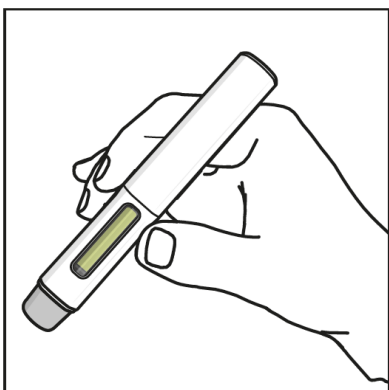

7. Injekcijas pabeigšana

- Saklausiet **otro klikšķi**. Tas norāda, ka injekcija ir **gandrīz** pabeigta.
- Pārbaudiet, vai **zaļais indikators ar pelēku uzgali** ir aizpildījis lodziņu un apstājies.
- Tagad pildspalvveida pilnšļirci var izvilkt no ādas.

8. Pārbaudiet, vai zaļais indikators ir aizpildījis lodziņu

- Tas nozīmē, ka visas zāles ir ievadītas. Ja zaļais indikators nav redzams, sazinieties ar savu ārstu.
- Injekcijas vietā ir iespējama viegla asiņošana. Injekcijas vietai 10 sekundes var piespiest vates piciņu vai marli. Neberzējiet injekcijas vietu. Injekcijas vietu varat pārklāt ar nelielu plāksteri, ja tas nepieciešams.

9. Kā izmest Cosentyx 300 mg UnoReady pildspalvveida pilnšļirci

- Pildspalvveida pilnšļirce jāizmet asu priekšmetu izmešanai domātā traukā (piemēram, necaurduramā noslēdzamā traukā u.tml.).
- Nekādā gadījumā nemēģiniet pildspalvveida pilnšļirci lietot atkārtoti.