

Cosentyx® 300 mg UnoReady® švirkštiklių vartojimo instrukcijos
sekukinumabas



Prieš suleidami vaisto perskaitykite VISAS šias instrukcijas.

Šios instrukcijos skirtos padėti Jums teisingai susileisti vaisto naudojant Cosentyx UnoReady švirkštiklį.

Labai svarbu, kad nebandytumėte susileisti vaisto patys, kol gydytojas, slaugytojas arba vaistininkas neišmokys Jūsų tinkamai to daryti.

Jūsų Cosentyx 300 mg UnoReady švirkštiklis:



Cosentyx 300 mg UnoReady švirkštiklis pavaizduotas su viršuje nuimtu dangteliu. **Nenuimkite** dangtelio, kol nebūsime pasiruošę atlikti injekcijos.

Nevartokite Cosentyx UnoReady švirkštiklio, jeigu pažeistas išorinės dėžutės sandarus įpakavimas.

Laikykite Cosentyx UnoReady švirkštiklį sandariai išorinėje dėžutėje, kol nebūsime pasiruošę jo vartoti, kad apsaugotumėte nuo šviesos.

Cosentyx UnoReady švirkštiklį laikykite išorinėje dėžutėje **šaldytuve** (2 °C – 8 °C temperatūroje) ir **vaikams nepasiekiamoje vietoje**.


- Švirkštiklio **negalima užšaldyti**.
- Švirkštiklio **negalima purtyti**.
- Nenaudokite švirkštiklio, jeigu jis **nukrito** ir nusiėmė dangtelis.

Adata uždengta adatos apsauga, todėl ji nebus matoma. Nelieskite ir nespauskite adatos apsaugos, nes galite susižaloti adatos smaigaliu.

Kokių priemonių reikės injekcijai atlikti:

Kartono dėžutėje yra:

Naujas ir nenaudotas Cosentyx 300 mg UnoReady švirkštiklis.

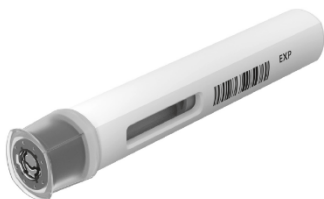


Kartono dėžutėje nėra:

- Spiritu suvilgyto tampono.
- Medvilnės ar marlės gniužulėlio.
- Aštriems daiktams skirtos talpyklės.



Prieš atliekant injekciją:

Iš šaldytuvo išimkite Cosentyx 300 mg UnoReady švirkštiklį ir palaikykite jį **30-45 minutes prieš injekciją**, kad vaistas sušiltų iki kambario temperatūros.

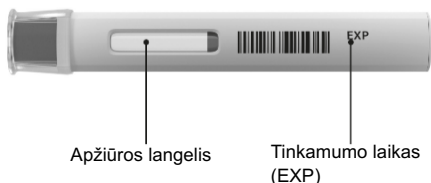

1. Svarbūs saugumo patikrinimai prieš atliekant injekciją:

„Apžiūros langelis“:

Tirpalas turi būti skaidrus. Jis gali būti bespalvis ar šviesiai gelsvas.



Nevartokite vaisto, jeigu tirpale yra aiškiai matomų dalelių, tirpalas yra drumstas ar aiškiai rudos spalvos. Galite pastebėti nedidelį oro burbuliukų, tai yra normalu.

„Tinkamumo laikas“:

Patikrinkite tinkamumo laiką (EXP) ant Cosentyx UnoReady švirkštiklio. **Nevartokite** vaisto, jeigu buvo pažeistas **sandarus įpakavimas**.

Patikrinkite, ar švirkštiklyje yra tinkami vaistai ir dozė.

Kreipkitės į vaistininką, jeigu švirkštiklis neatitinka bent vienos iš šių sąlygų.

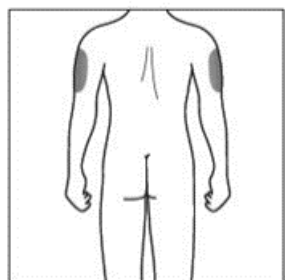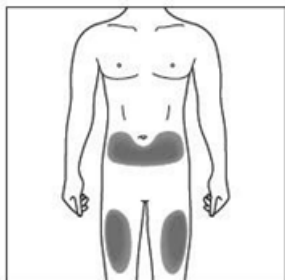

2a. Pasirinkite injekcijos sritį:

- Rekomenduojamos injekcijų sritys yra priekiniai šlaunų paviršiai. Taip pat vaisto galite suleisti į apatinę pilvo dalį, tačiau **negalima** leisti į 5 centimetrų plotą aplink bambą.
- Kiekvieną kartą leisdami vaisto pasirinkite vis kitą odos sritį.
- Neleiskite tose srityse, kurių oda skausminga, pažeista, paraudusi, pleiskanojanti ar sukietėjusi. Venkite tų odos sričių, kur yra randų ar strijų.

2b. Informacija tik slaugytojams ir sveikatos priežiūros specialistams:


- Jeigu vaisto Jums suleidžia **slaugytojas** ar **sveikatos priežiūros specialistas**, injekciją taip pat galima atlikti ir išorinėse žastų srityse.



3. Injekcijos vietos nuvalymas:


- Nusiplaukite rankas muilu ir šiltu vandeniu.
- Sukamaisiais judesiais nuvalykite injekcijos vietą spiritu suvilgytu tamponu. Prieš atliekant injekciją leiskite odai nudžiūti.
- Prieš atliekant injekciją nelieskite nuvalytos vietos.

Injekcijos atlikimas:

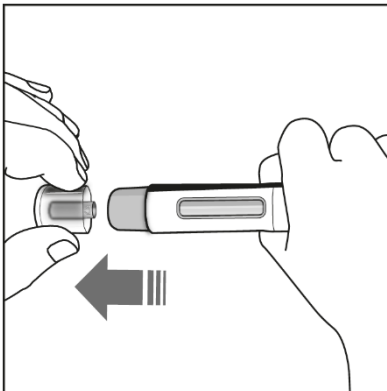



4. Nuimkite dangtelį:

- Dangtelį nuimkite tik tuomet, kai būsite pasirengę atlikti injekciją naudodamiesi švirkštikliu.
- Nuimkite dangtelį traukdami tiesiai rodyklės kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje kairėje pusėje.
- Nuimtą dangtelį išmeskite. Nebandykite vėl pritvirtinti dangtelio atgal.
- Nuėmus dangtelį švirkštiklį reikia vartoti per 5 minutes.

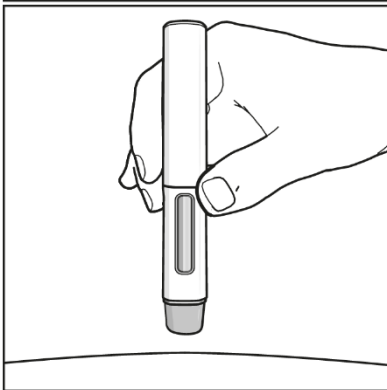

5. Švirkštiklio laikymas:

- Švirkštiklį laikykite 90° kampu ties nuvalyta injekcijos vieta.

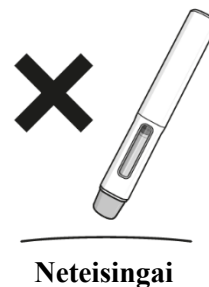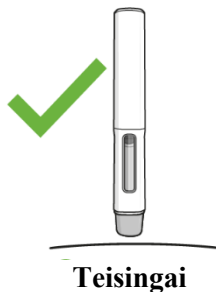


PRIEŠ ATLIKdami INJEKCIJĄ PRIVALOTE PERSKAITYTI ŠIĄ INFORMACIJĄ.

Injekcijos atlikimo metu Jūs išgirsite **2 spragtelėjimus**.

Pirmasis spragtelėjimas rodo, kad injekcija pradėta. Praėjus keletui sekundžių išgirsite **antrąjį spragtelėjimą**, kuris rodytų, kad injekcija beveik baigta.

Būtinai toliau tvirtai spauskite švirkštiklį prie odos, kol pamatysite, kad **žalias indikatorius su pilku galiuku** užpildys apžiūros langelį ir nustos judėti.

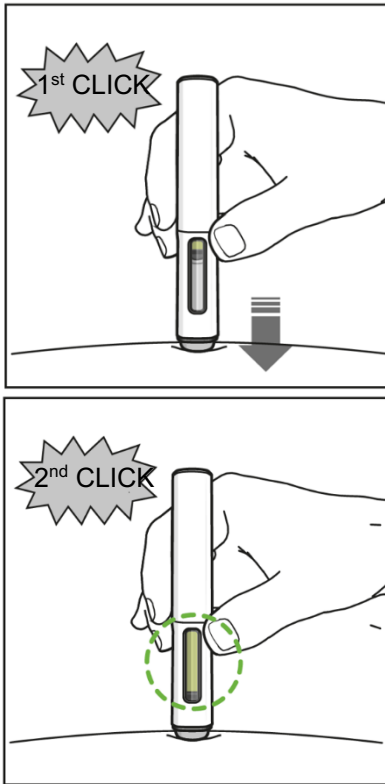


6. Injekcijos pradžia:

- Tvirtai prispauskite švirkštiklį prie odos ir pradėkite injekciją.
 - **Pirmasis spragtelėjimas** rodo, kad injekcija pradėta.
 - **Toliau tvirtai spauskite** švirkštiklį prie odos.
- Žalias indikatorius su pilku galiuku** rodys injekcijos eigą.

7. Injekcijos pabaiga:

- Klausykite, kol išgirsite **antrąjį spragtelėjimą**. Jis parodys, kad injekcija **beveik** baigta.
- Patikrinkite, ar **žalias indikatorius su pilku galiuku** užpildė apžiūros langelį ir nustojo judėti.
- Dabar švirkštiklį galima atitraukti.

Po injekcijos:

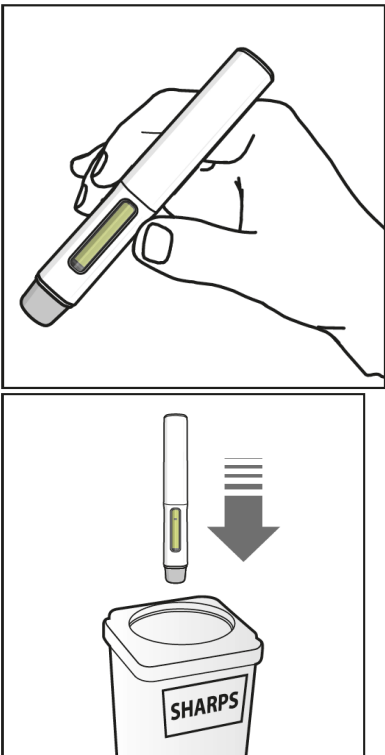

8. Patikrinkite, ar žalias indikatorius užpildė apžiūros langelį:

- Tai reiškia, kad vaistas buvo suleistas. Jeigu nematote žalio indikatoriaus, kreipkitės į gydytoją.
- Injekcijos vietoje gali likti šiek tiek kraujo. Injekcijos vietą galite prispausti medvilnės ar marlės gniužulėliu ir palaikyti 10 sekundžių. Injekcijos vietos netrinkite. Prireikus injekcijos vietą galite pridengti nedideliu pleistru.

9. Išmeskite Cosentyx 300 mg UnoReady švirkštiklį:

- Panaudotą švirkštiklį išmeskite į aštriems daiktams laikyti skirtą talpyklę (t. y., nepraduriamą uždara ar panašią talpyklę).
- Niekada nebandykite švirkštiklio naudoti pakartotinai.