

Instructions pour l'utilisation du stylo SensoReady de Cosentyx 150 mg



Stylo SensoReady de Cosentyx 150 mg

Solution injectable en stylo prérempli

Sécukinumab

Instructions d'utilisation destinées au patient




Veuillez lire ENTièrement ces instructions avant de procéder à l'injection.

Ces instructions ont pour but de vous aider à injecter correctement Cosentyx à l'aide du stylo SensoReady.

N'essayez surtout pas de faire l'injection à vous-même ou à une personne dont vous vous occupez avant d'avoir été formé(e) à le faire par votre médecin, infirmier/ère ou pharmacien.

Votre stylo SensoReady de Cosentyx 150 mg :

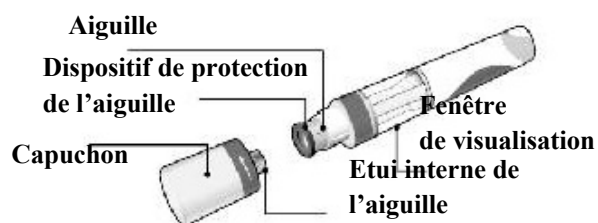

Stylo SensoReady de Cosentyx 150 mg représenté avec le capuchon retiré. **Ne retirez pas le capuchon** avant d'être prêt(e) à faire l'injection.

Conservez votre stylo dans sa boîte au **réfrigérateur** entre 2°C et 8°C et **hors de la portée des enfants**.

- **Ne pas congeler** le stylo.
- **Ne pas agiter** le stylo.
- Ne pas utiliser le stylo si celui-ci est **tombé** avec le capuchon enlevé.

Pour plus de confort lors de l'injection, sortez le stylo du réfrigérateur **15 à 30 minutes avant l'injection** afin de l'amener à température ambiante.

Matériel nécessaire pour réaliser votre injection :


Inclus dans la boîte :

Stylo SensoReady de Cosentyx 150 mg neuf et inutilisé (1 stylo est nécessaire pour une dose de 150 mg et 2 stylos sont nécessaires pour une dose de 300 mg)



Non inclus dans la boîte :


- Compresse imbibée d'alcool
- Coton ou compresse
- Collecteur pour objets tranchants

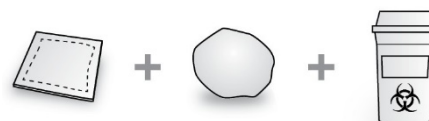

Avant de procéder à l'injection :

1. Vérifications de sécurité importantes à effectuer avant de procéder à l'injection :

Le liquide doit être limpide. Sa couleur peut varier d'incolore à jaune pâle.

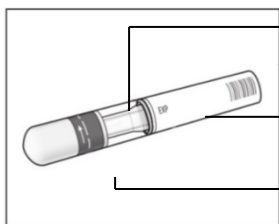


Ne pas utiliser si le liquide présente des particules clairement visibles, un aspect trouble ou une coloration nettement brune. Une petite bulle d'air peut être présente, ce qui est normal.

Ne pas utiliser le stylo si la date de péremption est dépassée.


Ne pas utiliser si le **dispositif d'inviolabilité** est endommagé.

Contactez votre pharmacien si le stylo ne respecte pas l'une de ces conditions.

2a. Choisissez le site d'injection :

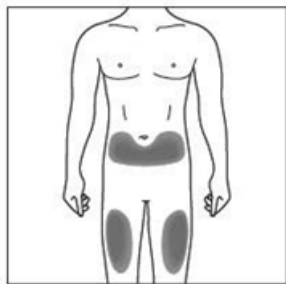

- Le site recommandé est le dessus de vos cuisses. Vous pouvez également faire l'injection au niveau du ventre, **sauf** dans un rayon de 5 centimètres autour du nombril.
- Choisissez un site différent à chaque injection.
- Ne faites pas d'injection aux endroits où la peau est sensible, présente des hématomes, est rouge, présente une desquamation (peaux mortes) ou est dure. Évitez les endroits présentant des cicatrices et des vergetures.

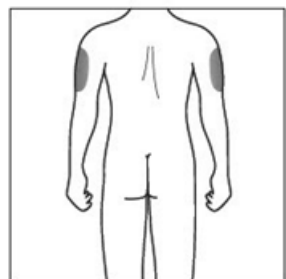

2 b. Aidants et professionnels de santé uniquement :


- Si l'injection est réalisée par un **aidant** ou un **professionnel de santé**, ils peuvent également faire l'injection dans la partie supérieure externe de votre bras.



3. Nettoyez le site d'injection :

- Lavez-vous les mains au savon et à l'eau chaude.
- En effectuant des mouvements circulaires, nettoyez le site d'injection avec la compresse imbibée d'alcool. Laissez la peau sécher avant de procéder à l'injection.
- Ne touchez plus la zone nettoyée avant l'injection.

Administration de l'injection :

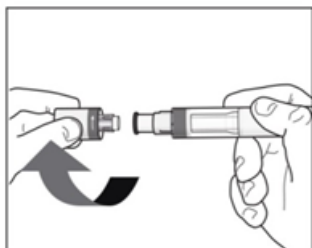


4. Retirez le capuchon :

- Ne retirez le capuchon que lorsque vous êtes prêt(e) à utiliser le stylo.
- Dévissez le capuchon dans le sens de la flèche.
- Une fois le capuchon retiré, jetez-le. **N'essayez pas de remettre le capuchon.**
- Utilisez le stylo dans les 5 minutes qui suivent le retrait du capuchon.



5. Positionnez le stylo :

- Tenez le stylo à angle droit (90 degrés) par rapport au site d'injection nettoyé.

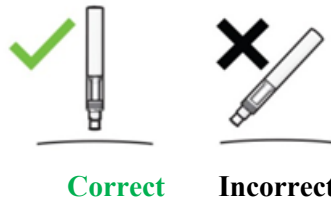


À LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INJECTION.

Pendant l'injection, vous entendrez **2 clics sonores**.


Le **1^{er} clic** indique que l'injection a commencé. Quelques secondes plus tard, un **2^e clic** vous indiquera que l'injection est **presque** finie.

Vous devez maintenir fermement le stylo contre votre peau jusqu'à ce qu'un **indicateur vert** remplisse la fenêtre et s'arrête de bouger.

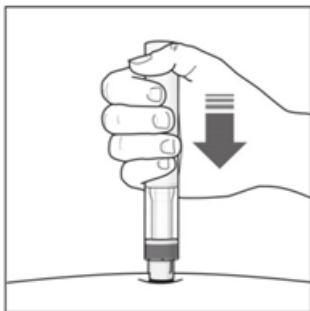

6. Commencez l'injection :


- Appuyez fermement le stylo contre votre peau pour commencer l'injection.
- Le **1^{er} clic** indique que l'injection a commencé.
- Maintenez** le stylo appuyé fermement contre votre peau.
- L'**indicateur vert** indique la progression de l'injection.

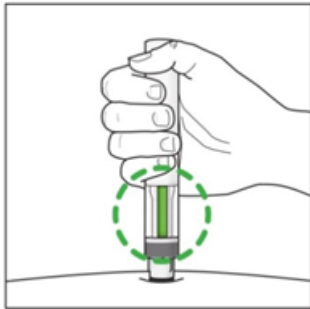

7. Terminez l'injection :


- Attendez d'entendre le **2^e clic**. Celui-ci vous indique que l'injection est **presque** finie.
- Vérifiez que l'**indicateur vert** a rempli la fenêtre et ne bouge plus.
- Le stylo peut maintenant être retiré.

Après l'injection :

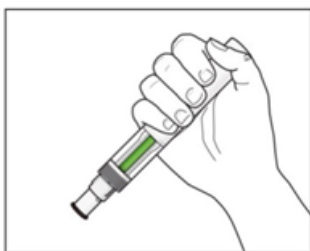

8. Vérifiez que l'indicateur vert a rempli la fenêtre :

- Cela signifie que le médicament a été administré. Contactez votre médecin si l'indicateur vert n'est pas visible.
- Il peut y avoir un peu de sang au niveau du site d'injection. Vous pouvez exercer une pression sur le site d'injection avec un morceau de coton ou une compresse pendant 10 secondes. Ne frottez pas votre peau au niveau du site d'injection. Vous pouvez appliquer un petit pansement sur le site d'injection, si nécessaire.

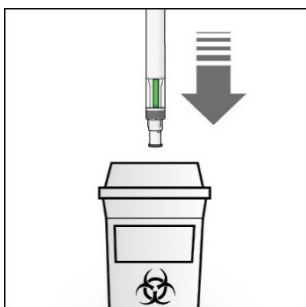

9. Jetez le stylo SensoReady de Cosentyx :

- Jetez le stylo usagé dans un collecteur pour objets tranchants (c'est-à-dire, un récipient refermable et résistant à la perforation, ou similaire).
- N'essayez jamais de réutiliser votre stylo.