

Instruksjoner for bruk av Cosentyx 300 mg UnoReady penn sekukinumab




Les **ALLE** instruksjoner nedenfor før injisering.

Formålet med disse instruksjonene er å hjelpe deg med å injisere riktig ved bruk av Cosentyx UnoReady penn.

Det er viktig at du ikke injiserer deg selv før du har fått opplæring av lege, sykepleier eller apotek.

Din Cosentyx 300 mg UnoReady penn:

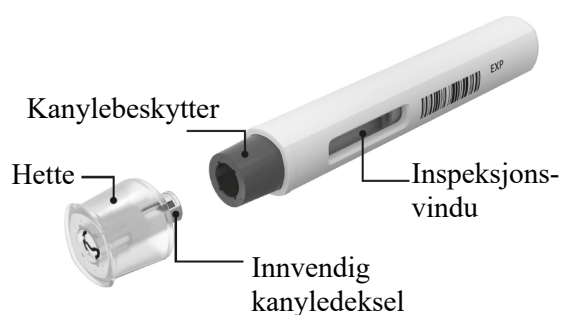

Cosentyx 300 mg UnoReady penn er ovenfor vist med hetten av. **IKKE** fjern hetten før du er klar til å injisere.

Ikke bruk Cosentyx UnoReady penn hvis forseglingen på ytterkartongen er brutt.

Oppbevar Cosentyx UnoReady pennen i den forseglede ytterkartongen inntil den skal brukes for å beskytte den mot lys.

Oppbevar Cosentyx UnoReady penn i et **kjøleskap** mellom 2 °C og 8 °C og **utilgjengelig for barn**.


- **Ikke frys** pennen.
- **Ikke rist** pennen.
- Ikke bruk pennen dersom den har blitt **mistet** med hetten av.

Kanylen er dekket av kanylebeskytteren og vil ikke være synlig. Ikke rør eller trykk på kanylebeskytteren fordi du kan få en stikkskade av kanylen.

Hva du trenger til injeksjonen:

Inkludert i pakningen:

En ny og ubrukt Cosentyx 300 mg UnoReady penn.

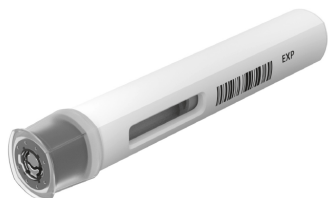


Ikke inkludert i pakningen:

- Sprintserviett.
- Bomulldott eller gasbind.
- Avfallsbeholder for skarpe gjenstander.



Før du injiserer:

Ta Cosentyx 300 mg UnoReady penn ut av kjøleskapet **30 til 45 minutter før injeksjon** slik at den når romtemperatur.

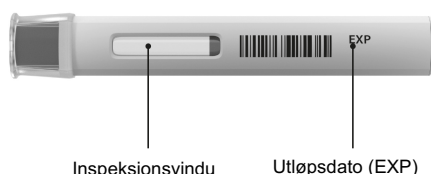

1. Viktige sikkerhetskontroller før du injiserer:

Vedrørende “inspeksjonsvinduet”:

Væsken skal være klar. Fargen kan variere fra fargeløs til lysegul.



Skal ikke brukes dersom væsken inneholder lett synlige partikler, er uklar, eller er tydelig brun. Du kan muligens se en liten luftboble, dette er normalt.

Vedrørende “Utløpsdato”:

Kontroller utløpsdatoen (EXP) på Cosentyx UnoReady pennen din. **Ikke bruk** pennen dersom **utløpsdatoen** er passert.

Kontroller at pennen din inneholder det riktige legemidlet og korrekt dose.

Kontakt apoteket dersom pennen ikke består én eller flere av disse kontrollene.

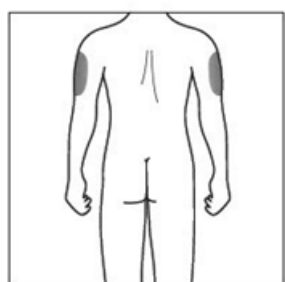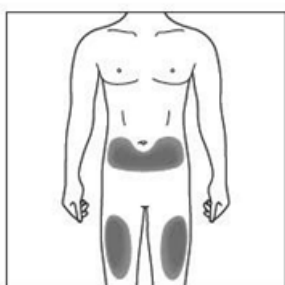

2a. Velg injeksjonssted:

- Det anbefalte stedet er forsiden av lårene. Du kan også bruke nedre del av magen, men **ikke** området 5 centimeter rundt navlen.
- Velg et nytt sted hver gang du gir deg selv en injeksjon.
- Ikke injiser i områder hvor huden er tynn, skadet, rød, skallete eller fortykket. Unngå områder med arr eller strekkmerker.


2b. Kun for omsorgspersoner og helsepersonell:

- Dersom en **omsorgsperson** eller **helsepersonell** gir deg injeksjonen, kan den også injiseres i yttersiden av overarmen.

3. Rengjøring av injeksjonsstedet:


- Vask hendene med såpe og varmt vann.
- Rengjør injeksjonsstedet med en spritserviett ved bruk av en sirkelbevegelse. La det tørke før injisering.
- Ikke rør det rengjorte området igjen før injisering.

Injeksjonen:

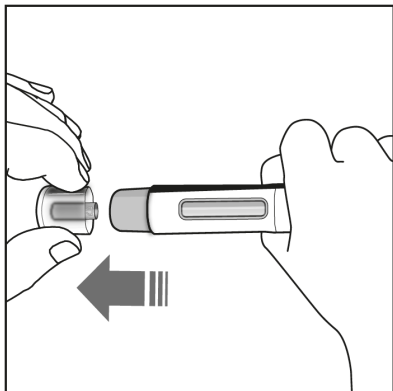


4. Fjern hetten:

- Fjern først hetten når du er klar til å bruke pennen.
- Trekk hetten rett av i pilens retning som vist i figuren til venstre.
- Kast hetten med det samme den er fjernet. Ikke prøv å sette hetten på igjen.
- Bruk pennen innen 5 minutter etter at hetten er fjernet.

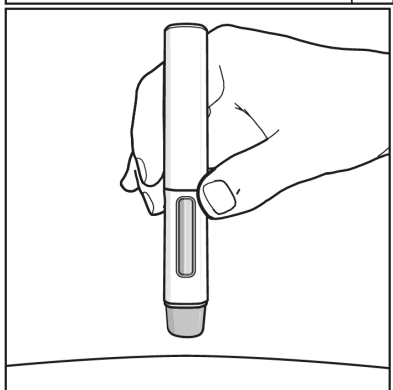


5. Slik holder du pennen:

- Hold pennen i 90 graders vinkel mot det rengjorte injeksjonsstedet.

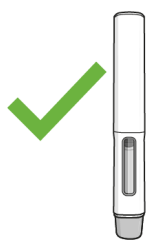

Riktig

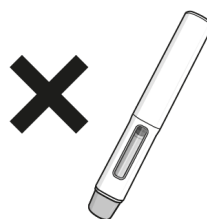

Galt




DU MÅ LESE DETTE FØR INJISERING.

Under injeksjonen vil du høre **2 klikk**.


Det **første klikket** indikerer at injeksjonen har startet. Flere sekunder senere vil et **andre klikk** indikere at injeksjonen **nesten** er ferdig.

Du må fortsette å holde pennen fast mot huden til du ser en **grønn indikator med en grå spiss** fylle vinduet og stoppe å bevege seg.

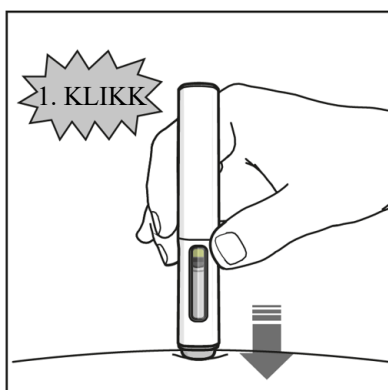

6. Start injeksjonen:


- Press pennen fast mot huden for å starte injeksjonen.
- Det **første klikket** indikerer at injeksjonen har startet.
- **Fortsett å holde** pennen fast mot huden.
Den **grønne indikatoren med den grå spissen** viser forløpet av injeksjonen.

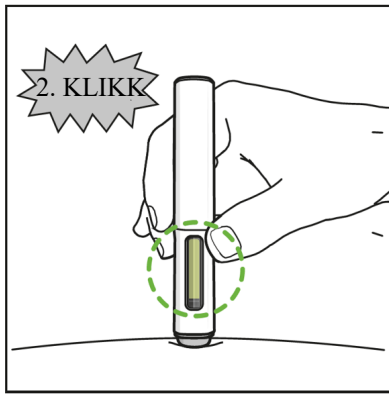

Avslutning av injeksjonen:


- Vent på det **andre klikket**. Dette indikerer at injeksjonen **nesten** er ferdig.
- Sjekk at den **grønne indikatoren med den grå spissen** fyller vinduet og har stoppet å bevege seg.
- Pennen kan nå fjernes.

Etter injeksjonen:

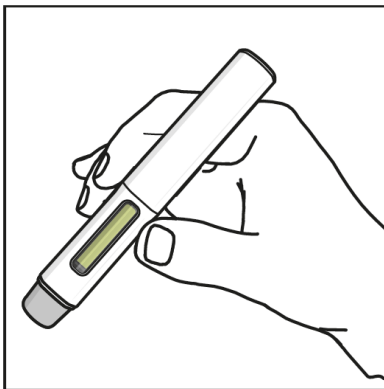

8. Kontroller at den grønne indikatoren fyller vinduet:

- Dette betyr at legemidlet har blitt levert. Kontakt lege dersom den grønne indikatoren ikke er synlig.
- Det kan muligens være litt blod på injeksjonsstedet. Du kan trykke en bomulldott eller litt gasbind mot injeksjonsstedet og holde det der i 10 sekunder. Ikke gni på injeksjonsstedet. Ved behov kan du dekke injeksjonsstedet med et lite plaster.

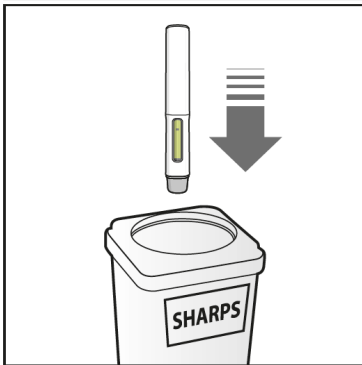

9. Destruksjon av Cosentyx 300 mg UnoReady penn:

- Kast den brukte pennen i en avfallsbeholder for skarpe gjenstander (dvs. en beholder som kan lukkes og ikke kan stikkes hull i, eller lignende).
- Prøv aldri å gjenbruke pennen.

