

Pokyny na použitie pera Cosentyx 150 mg SensoReady



Pero Cosentyx 150 mg SensoReady

Injekčný roztok v naplnenom pere

Sekukinumab

Pokyny na používanie pre pacienta




Pred podaním injekcie si prečítajte VŠETKY tieto pokyny.

Tieto pokyny vám majú pomôcť správne si podať injekciu pomocou pera Cosentyx SensoReady.

Je dôležité, aby ste sa nepokúšali podať injekciu sebe alebo osobe vo vašej starostlivosti sám, kým vás nezaškolí lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik.

Pero Cosentyx 150 mg SensoReady:

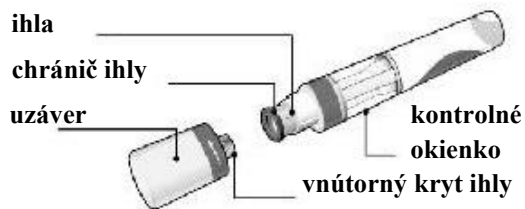

Uchovávajte škatuľu s perom v **chladničke** pri teplote 2°C až 8°C a **mimo dosahu detí**.

- **Neuchovávajte** pero v **mrazničke**.
- **Nepotriasajte** perom.
- Nepoužite pero, ak vám **spadlo** s odstráneným uzáverom.


Pero Cosentyx 150 mg SensoReady je zobrazené s odstráneným uzáverom. **Neodstráňte** uzáver, kým nie ste pripravený podať si injekciu.

Pre uľahčenie podania injekcie vyberte pero z chladničky **15-30 minút pred podaním injekcie**, aby sa mohlo ohriať na izbovú teplotu.

Čo potrebujete na podanie injekcie:

Nachádza sa v škatuli:

Nové a nepoužívané pero Cosentyx 150 mg SensoReady (1 pero je potrebné na dávku 150 mg a 2 perá sú potrebné na dávku 300 mg).

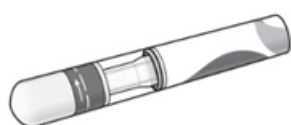

Nenachádza sa v škatuli:


- tampón napustený alkoholom
- vatový tampón alebo gáza
- nádoba na likvidáciu ostrých predmetov



Pred podaním injekcie:

1. Dôležitá bezpečnostná kontrola pred podaním injekcie:

Tekutina musí byť číra. Jej farba sa môže meniť od bezfarebnej po bledožltú.

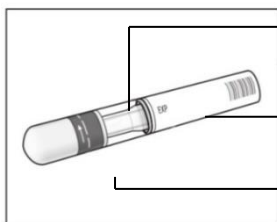


Nepoužite ak tekutina obsahuje ľahko viditeľné častice, ak je zakalená alebo výrazne hnedá. Môže v nej byť malá vzduchová bublina, čo je normálne.

Nepoužite pero, ak je po dátume expirácie.


Nepoužite pero, ak je poškodený bezpečnostný spoj.

Obráťte sa na svojho lekárnika, ak pero nespĺňa ktorúkoľvek z týchto požiadaviek.

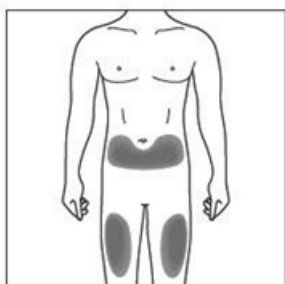

2a. Vyberte si miesto podania injekcie:

- Odporúčaným miestom podania injekcie je predná strana stehna. Môžete použiť aj dolnú časť brucha, ale **nie** oblasť 5 cm okolo pupka.
- Pri každom podaní injekcie si zvolte iné miesto.
- Nepodajte si injekciu do miesta s bolestivou, pomliaždenou, červenou, šupinatou alebo stvrdnutou kožou. Vyhýbajte sa oblastiam s jazvami alebo striami.

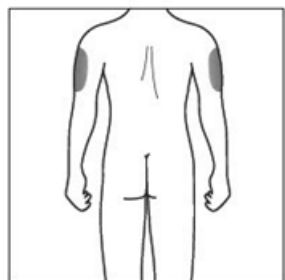

2b. Iba pre opatrovateľov a zdravotníckych pracovníkov:


- Ak vám injekciu podáva **opatrovateľ** alebo **zdravotnícky pracovník**, môžu vám ju podať aj do vonkajšej strany ramena.



3. Očistenie miesta podania injekcie:

- Umyte si ruky mydlom a horúcou vodou.
- Tampónom napusteným alkoholom krúživým pohybom očistite miesto podania injekcie. Pred podaním injekcie ho nechajte uschnúť.
- Pred podaním injekcie sa už očistenej plochy nedotýkajte.

Injekcia:

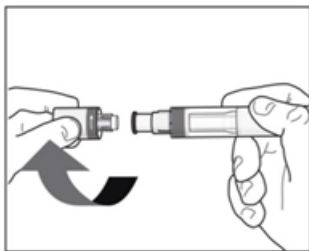

4. Odstránenie uzáveru:

- Uzáver odstráňte až vtedy, keď ste pripravený použiť pero.
- Odskrutkujte uzáver v smere šípky.
- Uzáver po odstránení zahod'te. **Nepokúšajte sa uzáver znovu nasadiť.**
- Použite pero do 5 minút od odstránenia uzáveru.



5. Ako držať pero:

1. Držte pero pod uhlom 90 stupňov nad očisteným miestom podania.



správne



nesprávne




TOTO SI MUSÍTE PREČÍTAŤ PRED PODANÍM INJEKCIE.

Počas podania injekcie budete počuť **dve hlasné kliknutia**.


Prvé kliknutie je znamením, že sa začalo podanie injekcie. **Druhé kliknutie** o niekoľko sekúnd neskôr je znamením, že podanie injekcie sa **takmer** skončilo.

Pero musíte držať silno pritlačené ku koži dovtedy, kým uvidíte, ako **zelený indikátor** zaplnil okienko a prestal sa posúvať.

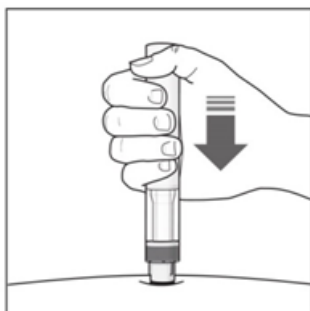

6. Začiatok podania injekcie:

- Pritlačte pero pevne ku koži a začnite podávať injekciu.
- **Prvé kliknutie** je znamením, že sa začalo podanie injekcie.
- **Pero držte ďalej** pevne pritlačené ku koži.
- **Zelený indikátor** ukazuje, ako pokračuje podanie injekcie.

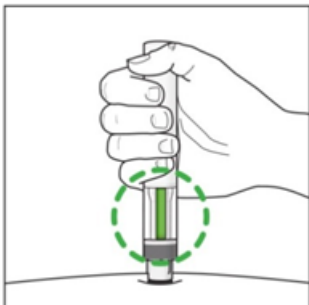

7. Ukončenie podania injekcie:


- Čakajte na **druhé kliknutie**. Je znamením, že podanie injekcie sa **takmer** skončilo.
- Skontrolujte, či **zelený indikátor** zaplnil okienko a prestal sa posúvať.
- Teraz môžete pero odtiahnuť.

Po podaní injekcie:



8. Skontrolujte, či zelený indikátor zaplnil okienko:

- Znamená to, že liek bol podaný. Ak zelený indikátor nie je vidieť, spojte sa so svojím lekárom.
- Na mieste podania injekcie sa môže objaviť malé množstvo krvi. Môžete na miesto vpichu pritlačiť vatový tampón alebo gázu a 10 sekúnd ju tam pridržať. Miesto vpichu nešúchajte. Ak je to potrebné, môžete miesto podania injekcie prekryť malou náplastou.

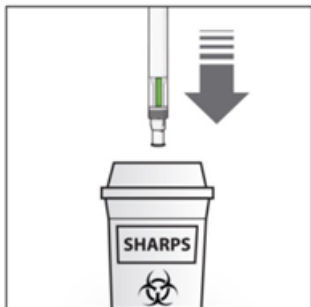

9. Likvidácia pera Cosentyx SensoReady:

- Použité pero zahodíte do nádoby na likvidáciu ostrých predmetov (t.j. uzatvorený kontajner, odolný voči prepichnutiu, alebo niečo podobné).
- Nikdy sa nepokúšajte pero znovu použiť.