

Instrucciones de uso de Cosentyx 150 mg en pluma SensoReady



Cosentyx 150 mg en pluma SensoReady

Solución inyectable en pluma precargada

Secukinumab

Instrucciones de uso para el paciente




Lea **TODAS** las instrucciones antes de inyectarse el medicamento.

Estas instrucciones le van a ayudar a ponerse correctamente Cosentyx en pluma SensoReady.

Es importante que usted no intente inyectarse el medicamento o a una persona bajo su cuidado hasta que el médico, la enfermera o el farmacéutico le hayan enseñado cómo hacerlo.

Su Cosentyx 150 mg en pluma SensoReady:

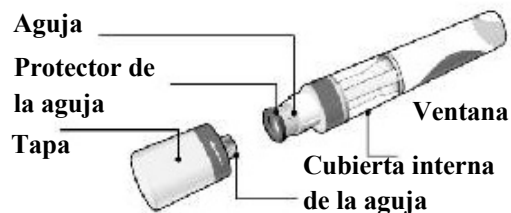

Conserve la caja con la pluma en la **nevera** entre 2°C y 8°C y **fuera del alcance de los niños**.

- **No congelar** la pluma.
- **No agitar** la pluma.
- No utilizar la pluma si se **cae** sin la tapa.


Cosentyx 150 mg en pluma SensoReady sin tapa. **No** quite la tapa hasta que esté listo para ponerse la inyección.

Para una inyección más agradable, saque de la nevera la pluma **15-30 minutos antes** para que se atempere.

Qué necesita para la inyección:

Incluido en la caja:

Una pluma SensoReady de Cosentyx 150 mg nueva y sin usar (se necesita 1 pluma para la dosis de 150 mg y 2 plumas para la dosis de 300 mg).

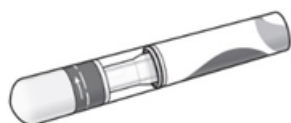

No incluido en la caja:

- Toallita humedecida en alcohol.
- Algodón y gasa.
- Cubo de eliminación de objetos punzantes.




Antes de la inyección:

1. Antes de inyectarse compruebe los aspectos importantes de seguridad:

El líquido debe ser transparente. Su color puede variar de incoloro a ligeramente amarillento.

No utilizar si el líquido contiene partículas, está turbio o tiene un color claramente marrón. Puede ver pequeñas burbujas de aire, que es normal.

No utilice la pluma si ha pasado la **fecha de caducidad**.

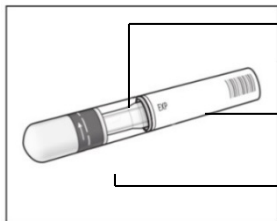


No utilizar si el **precinto** está roto.

Contacte con su farmacéutico si la pluma no cumple con alguno de estos requisitos.


2a. Elija un lugar de inyección:

- Se recomienda utilizar la parte superior de los muslos. También puede utilizar la parte inferior de abdomen, pero **no** en un área de 5 cm alrededor del ombligo.
- Elija cada vez un nuevo lugar para la inyección.
- No inyecte en ninguna zona donde la piel esté sensible, dañada, enrojecida, descamada o dura. Evite las zonas con cicatrices o estrías.

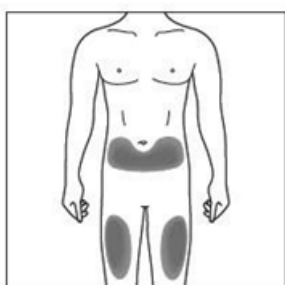

2b. Solo cuidadores o profesionales sanitarios:

- Si quien pone la inyección es **la persona que cuida al paciente o profesional sanitario**, entonces también se puede utilizar la parte superior de los brazos.

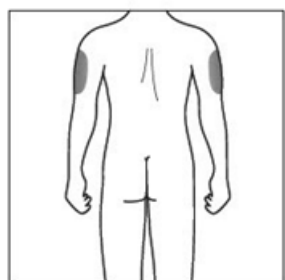

3. Desinfecte el lugar de inyección:


- Lávese antes las manos con agua caliente y jabón.
- Desinfecte el lugar de inyección con una toallita humedecida con alcohol, haciendo un movimiento circular. Déjelo secar antes de ponerse la inyección.
- No vuelva a tocar la zona limpia antes de la inyección.



La inyección:

4. Quite la tapa:

- Quite la tapa solo cuando esté listo para utilizar la pluma.
- Desenrosque la tapa en la dirección de la flecha.
- Una vez retirada, deséchela. **No intente enroscarla de nuevo.**
- Utilice la pluma en los 5 minutos posteriores a haberle quitado la tapa.

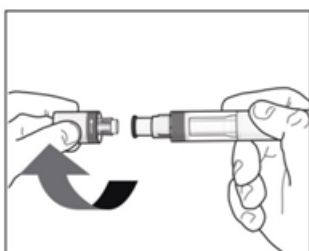



5. Sujete su pluma:

- Sujete la pluma a 90° del lugar de inyección desinfectado.



Correcto



Incorrecto




DEBE LEER LO SIGUIENTE ANTES DE LA INYECCIÓN.

Durante la inyección, usted oirá **2 clics intensos**.


El **1^{er} clic** indica el inicio de la inyección. Después de unos segundos, el **2^o clic** indicará que la inyección está **a punto** de finalizar.

Mantenga la pluma firmemente presionada contra la piel hasta que el **indicador verde** llene la ventana y haya dejado de moverse.

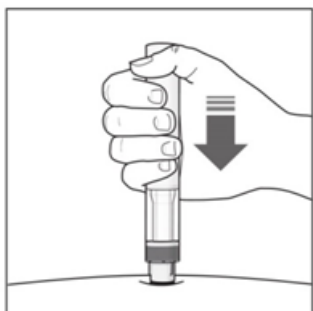

6. Inicio de la inyección:

- Presione con firmeza la pluma contra la piel para iniciar la inyección.
- El **1^{er} clic** indica el inicio de la inyección.
- Mantenga** la pluma firmemente **presionada** contra la piel.
- El **indicador verde** le indicará el progreso de la inyección.

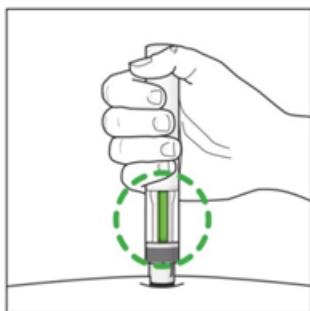

7. Final de la inyección:

- Escucha el **2^o clic**. Esto indica que la inyección está **a punto** de finalizar.
- Verifique que el **indicador verde** llene la ventana y haya dejado de moverse.
- Ahora puede retirar la pluma.

Después de la inyección:



8. Verifique que el indicador verde llene la ventana:

- Esto significa que el medicamento ha sido administrado. En el caso que no se viera el indicador verde, póngase en contacto con su médico.
- Puede haber una pequeña cantidad de sangre en el lugar de la inyección. Puede presionar durante 10 segundos con un algodón o una gasa la zona de inyección. No se frote el lugar de inyección. Se puede poner una tirita si lo necesita.



9. Eliminación de Cosentyx en pluma SensoReady:

- Deseche la pluma usada en un cubo de eliminación de objetos punzantes (recipiente cerrado y resistente a pinchazos o similar).
- Nunca trate de reutilizar la pluma.